



HB 8891-A

HB 8891-B

HB 8891-G

HB 8891-S

HB 8891-V

**Oszillosäge / Oscillo-Saw / Scie oscillatrice /
Sierra Oscillo / Segá oscillante**

GOLD II Autopsie

Gebrauchs- und Serviceanleitung

Seite 3

DEUTSCH

Operating and service manual

Page 19

ENGLISH

Mode d'emploi et de service

Page 33

FRANÇAIS

Instrucciones para el uso y el servicio

Página 47

ESPAÑOL

Istruzioni per l'uso e di servizio

Pagina 61

ITALIANO





- HB 8891-A**
- HB 8891-B**
- HB 8891-G**
- HB 8891-S**
- HB 8891-V**

Oszillierende Gipssäge

HEBU Oszillosäge GOLD II Autopsie







Inhalt

1	Symbolerläuterungen.....	5
2	Lieferumfang.....	5
3	Sicherheitshinweise.....	6
4	Einsatzbereich.....	6
4.1	Zweckbestimmung.....	6
4.2	Kontraindikationen.....	7
5	Sägeblatt montieren / wechseln.....	7
5.1	Öffnen der Halteschraube / Entfernen des alten Sägeblattes.....	7
5.2	Einsetzen des neuen Sägeblattes.....	8
6	Bedienung.....	8
6.1	Öffnen von Hartverbänden.....	9
6.2	Für die Autopsie.....	9
7	Reinigung und Wartung.....	10
7.1	Verwendung als Gipssäge.....	10
7.2	Verwendung als Autopsiesäge.....	10
8	Sterilisation.....	11
9	Zubehör.....	12
10	Ersatzteile.....	12
11	Service.....	13
11.1	Sägenkopf.....	13
11.2	Sägenmotor.....	14
12	Garantie.....	16
13	Umweltschutz.....	16
14	Technische Daten.....	16
15	Service- und Herstelleradresse.....	17



HEBU
Oszillosäge
GOLD II
Autopsie

1 Symbolerläuterungen


Symbol	Definition
	CE-Kennzeichnung
	Achtung
	Hersteller
	WEEE-Kennzeichnung
 /  Hinweis auf eIFU	(Elektronische) Gebrauchsanweisung






2 Lieferumfang

HB 8891	HEBU Oszillosäge GOLD II Autopsie
HB 8892-01	Autopsiesägeblatt Segment Ø 65 mm
HB 8893-01	Tiefensägeblatt, , Ø 70 mm, für Gips
HB 8877	Spezialfett, 8 g Tube
E 8894-01	2x Gabelsschlüssel
E 8891-03	Torxschlüssel mit T-Griff
	Gebrauchsanweisung

3 Sicherheitshinweise

Unsere Produkte sind ausschließlich für den professionellen Einsatz gemäß der Zweckbestimmung von entsprechend ausgebildetem und qualifiziertem Fachpersonal bestimmt und dürfen auch nur durch dieses erworben werden.

Alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind mit  gekennzeichnet.

	Bei diesem Produkt handelt es sich NICHT um ein Medizinprodukt nach (EU) 2017/745.
	Lesen Sie vor Gebrauch diese Bedienungsanleitung sowie die einschlägigen nationalen Arbeitsschutzbestimmungen und handeln Sie auch danach. <i>Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Gebrauch auf und legen Sie diese auch bei einer Weitergabe oder Veräußerung dem Gerät bei.</i>
	Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Gerät ist bestimmt zum Öffnen von Hartverbänden und zur Autopsie.
	Keine Schilder und Zeichen auf das Gerät nieten oder schrauben. Die Schutzisolierung kann dadurch unwirksam werden. Empfohlen werden Klebeschilder.
	Nur unbeschädigte Stecker und Kabel verwenden. Überprüfen Sie Kabel und Stecker regelmäßig.
	Netzspannung und Spannungsangabe am Gerät müssen übereinstimmen.
	Nur Original-Zubehör verwenden.
	Persönliche Schutzausrüstung tragen. Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe.
	Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden.
	Vermeiden Sie unsachgemäßes Werfen oder Fallenlassen des Produkts.

4 Einsatzbereich

Der Einsatz von oszillierenden Autopsiesägen findet vorwiegend in der Autopsie statt.

4.1 Zweckbestimmung

Ein von Hand gehaltenes, strombetriebenes (Wechselstrom) Produkt zum Schneiden von Gips oder synthetischem Material üblicherweise während der Entfernung eines Gipsverbandes. Das proximale Ende (der Griff) ist üblicherweise zylindrisch, während das distale Ende in einem runden, halbmondförmigen oder kreisförmigen Blatt endet, geeignet um Gipsverbandmaterial zu schneiden. Die Blätter schneiden, weil ein elektrischer Motor im Griff sie antreibt (schwingen). Der Schnitt erfolgt eher durch Vibrieren als durch Sägen.

4.2 Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt

5 Sägeblatt montieren / wechseln



Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Einschalten.
Vor dem Wechseln Stecker ziehen. Verwenden Sie gegebenenfalls stabile Handschuhe, damit Sie sich nicht am Sägeblatt verletzen können. Die HEBU Oszillosäge nur im ausgeschalteten Zustand anschließen.

5.1 Öffnen der Halteschraube / Entfernen des alten Sägeblattes

1. Legen Sie die Säge auf eine stabile Unterlage (Tisch).
2. Setzen Sie einen Gabelschlüssel an der Antriebswelle hinter dem Sägeblatt an, den zweiten vorne an der Halteschraube (siehe Abbildung 1).
3. Halten Sie den hinteren Schlüssel fest und nutzen ihn dazu, die Säge zu fixieren.
4. Öffnen Sie mit dem vorderen Schlüssel die Halteschraube.
5. Entfernen Sie die Halteschraube und den Fixierring.
Achten Sie darauf, dass keine Teile verloren gehen.
6. Entfernen Sie gegebenenfalls das alte Sägeblatt.



Abbildung 1:
Lösen der Halteschraube

5.2 Einsetzen des neuen Sägeblattes

1. Prüfen Sie Innengewinde und Sägeblattauflage der Antriebswelle auf Sauberkeit.

2. Neues Sägeblatt auflegen.

Es spielt keine Rolle, welche Seite des Sägeblattes nach außen bzw. innen zeigt.

Wichtig!

Die Einkerbungen im Sägeblatt müssen exakt auf den beiden Zapfen der Antriebswelle liegen.

3. Legen Sie den Fixierring auf. Die Einkerbungen im Fixierring müssen immer zur Säge zeigen (siehe Abbildung 2). Diese müssen ebenfalls genau auf den Zapfen liegen.

4. Halteschraube von Hand eindrehen und leicht festziehen.

5. Danach mit Hilfe der Gabelschlüssel, wie oben beschreiben, anziehen. Das Anzugsmoment beträgt 6 - 7 Nm. Achtung! Nicht überdrehen.



Abbildung 2:
Einsetzen des Sägeblattes

6 Bedienung

Ein- und Ausschalten (Abbildung 3)

Einschalten: Schalter nach vorne schieben (1)

Ausschalten: Schalter nach hinten schieben (0)



Abbildung 3

Schwingfrequenz einstellen (Abbildung 4)

Schwingfrequenz bei laufendem Motor wählen.

Am Drehzahlsteller kann die optimale Schwingfrequenz je nach Beschaffenheit des Verbandstoffes eingestellt werden.

Schwingfrequenzvorwahl mit elektronischem Drehzahlsteller.

Niedrigste Schwingfrequenz (1)

Höchste Schwingfrequenz (8)



Abbildung 4

6.1 Öffnen von Hartverbänden

Wählen Sie zu Beginn ein passendes Sägeblatt aus.

Die HEBU Oszillosäge mit aufgesetztem Sägeblatt auf den zu öffnenden Verband ansetzen und leicht eindrücken. Die Führungshand kann dabei als Stütze und Tiefensteuerung benutzt werden und verhindert abruptes Eindringen, wenn der Verband durchschnitten ist.

Solange das Sägeblatt durch den Gips schneidet ist ein Widerstand spürbar. Sobald der Gips durchschnitten ist, verschwindet der Widerstand. Ist dieser Durchbruch fühlbar, wird das Sägeblatt leicht angehoben, ohne es aus der Schnittrinne herauszunehmen und um ca. 15 mm in Schnittrichtung vorwärts bewegt. Anschließend wird neu angesetzt und in derselben Weise vorgegangen wie oben beschrieben, bis das nächste Stück durchtrennt ist.

Der Gipsverband wird somit durch eine Reihe von Schnitten und linearen Bewegungen entlang der Schnittlinie sicherer geöffnet, als dies durch einen stetigen, linearen Schnitt geschieht.

Bereits nach wenigen Anwendungen tritt Gewohnheit beim Führen der Säge durch den Gipsverband auf sowie das Gefühl, in dem Augenblick das Sägeblatt nicht mehr zu belasten, in welchem der Widerstand nicht mehr spürbar ist.

Zusätzliche Hinweise:

- Fast jeder Gips- oder Kunststoffhartverband weist aufgrund verschiedener Materialien unterschiedliche Eigenschaften auf. Versuchen Sie, während des Arbeitens die optimale Drehzahl herauszufinden.
- Bei Kunststoffverbänden ist eine geringere Drehzahl von Vorteil. Somit wird verhindert, dass der Kunststoff beim Auftrennen aufgrund der Reibungswärme zu schmelzen beginnt.
- Im Verband eingelegte Metallschienen sollten nicht geschnitten werden.
- Überprüfen Sie während des Sägens die Halteschraube auf ihren festen Sitz und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Bei Überlastung des Motors wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Die Sicherung (siehe S. 15, Abbildung 9, Pos 115) befindet sich auf der Elektronikplatine (siehe S. 15, Abbildung 7, Pos 110) und lässt sich nach Aufschrauben des Gehäuses mit wenigen Handgriffen auswechseln.
- Abgenutzte, stumpfe Sägeblätter führen zu erhöhter Motorbelastung und sollten daher regelmäßig überprüft und rechtzeitig ausgewechselt werden.
- Um eine gleichmäßige Abnutzung des Sägeblattes zu erreichen, öffnen Sie die Halteschraube und drehen Sie das Sägeblatt um 90°.

6.2 Für die Autopsie

Die oszillierende Säge wird in der Autopsie verwendet, um Knochen zu schneiden und zu durchtrennen. Die Führung der Säge erfolgt wie unter 4.1 beschrieben.

Im pathologischen Einsatz können gegebenenfalls auch Hartverbände mit der Autopsiesäge geöffnet werden.

Die zusätzlichen Hinweise sind auch hier zu beachten!

7 Reinigung und Wartung



Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Einschalten. Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten Stecker ziehen.

Eine Wischdesinfektion ist für Motorgehäuse, Kabel, Netzstecker und sämtliches Zubehör, wie Sägeblätter und Gabelschlüssel geeignet. Dazu empfehlen wir Produkte mit einem pH-Wert zwischen 9 und 10, z.B. MediClean forte von Dr. Weigert.

Es ist darauf zu achten, dass das Gerät dabei vom Stromnetz getrennt ist und die Desinfektionsflüssigkeit nicht ins Innere des Motors gelangt.



Abbildung 5

7.1 Verwendung als Gipssäge

Folgende Maßnahme sollte einmal pro Woche, bei häufigem Gebrauch mehrmals, durchgeführt werden: Kühlluftöffnungen (s. Abbildung 5) reinigen, um ausreichenden Luftdurchlass für die Motorkühlung zu gewährleisten. Motorraum von außen mit trockener Druckluft ausblasen.

7.2 Verwendung als Autopsiesäge

Nach jedem Gebrauch sollte eine Reinigung erfolgen. Eine gründliche Reinigung kann nur im abmontierten Zustand des Sägeblatts erfolgen (vergleiche Punkt 3.1 Öffnen der Halteschraube/ Entfernen des alten Sägeblattes). Hierfür sind die zwei Kopfschrauben zu lösen und vollständig herauszudrehen. Sechskantschraube, Sicherungsring und Sägeblatt müssen abgenommen werden. Der Sägekopf (Getriebeteil) ist abzuziehen (vgl. Abbildung 10)



Abbildung 10



Hierbei besteht Verletzungsgefahr! Verwenden Sie gegebenenfalls stabile Handschuhe, damit Sie sich nicht am Sägeblatt verletzen können.

Zur maschinellen Reinigung ist der Sägekopf horizontal hinzulegen- (vgl. Abb.11). Die maschinelle Reinigung sollte mit einem Standard Reinigungs- Programm erfolgen. Das Reinigungsmittel muss einen pH- Wert von <10 besitzen, da ansonsten die Oberflächenbeschichtung beschädigt wird.

Zur manuellen Reinigung sollten wie gewohnt Kunststoffbürsten und/oder Reinigungspistolen verwendet werden. Es sollten keine Reinigungsmittel mit fixierender Wirkung verwendet werden. Der pH-Wert sollte auch hier <10 sein, damit die Oberflächenbeschichtung nicht beschädigt wird. Den Sägekopf mit vollentsalztem Wasser spülen. Anschließend mit Desinfektionsmittel behandeln.



Abbildung 11



**Nur der Sägekopf darf aufbereitet und sterilisiert werden!
Nicht der Elektromotor!**

Weiterhin sollten die Kühlluftöffnungen (s. Abbildung 5) gereinigt werden, um ausreichenden Luftdurchlass für die Motorkühlung zu gewährleisten. Hierfür Motorraum von außen mit trockener Druckluft ausblasen.

Erst nach der Sterilisation erfolgt die Montage

8 Sterilisation

Nur Sägekopf (Getriebeteil) im Dampf autoklavieren!

Elektromotor nicht autoklavieren und nicht mit Wasser bzw. anderen Flüssigkeiten sowie deren Dämpfe in Berührung bringen.

Demontage:

Sechskantschraube, Sicherungsring und Sägeblatt abnehmen. Die zwei Inbusschrauben lösen und vollständig ausdrehen.

Sägekopf (Getriebeteil) abziehen und wie folgt autoklavieren:

Vor der Sterilisation muss der Sägekopf den Reinigungs- und Desinfektionsvorgang durchlaufen, rückstandsfrei mit demineralisiertem Wasser gespült und getrocknet sein.

Zur Sterilisation empfiehlt HEBUmedical ein validiertes Dampfsterilisationsverfahren (z.B. Sterilisator gemäß EN 285 und validiert gemäß DIN EN ISO 17665-1).

Bei der Anwendung des fraktionierten Vakuumverfahrens erfolgt die **Sterilisation** bei mindestens **134° C (USA 132° C)** und einer **Mindesthaltezeit von 3 Minuten**. Anschließend ist eine Vakuumtrocknung für mindestens 20 Minuten durchzuführen.

Montage:


Erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass die Schwinge vor dem Einbau mit etwa 1ml des Fetts HB 8877 leicht gefettet wird. Außerdem sind die Schrauben mit 6Nm festzuschrauben.




Achtung: Das Aufstecken des Sägekopfes auf den Motor erfolgt durch Andrücken mit leichten Hin- und Her-Bewegungen bis die Schwinge mit ihren Gabeln außerhalb des Rillenkugellagers eingerastet ist.

9 Zubehör

HB 8899-01	Kunststoffkoffer mit Einsatz
HB 8889-01	Nachrüstset (Sauger, Schlauch, Absaugglocke, Werkzeug), 220-240V
HB 8889-01V	Nachrüstset (Sauger, Schlauch, Absaugglocke, Werkzeug), 100-120V
HB 8878-01	Patentschraube
HB 8895-04	Rundsägeblatt „non-stick“, Ø 50 mm
HB 8896-04	Rundsägeblatt „non-stick“, Ø 65 mm
HB 8895-03	Rundsägeblatt TITANIUM, Ø 50 mm
HB 8896-03	Rundsägeblatt TITANIUM, Ø 65 mm
HB 8897-01	Rundsägeblatt, Ø 44 mm, für Gips
HB 8897-02	Rundsägeblatt, Ø 44 mm, x-bite
HB 8895-01	Rundsägeblatt, Ø 50 mm, für Gips
HB 8895-02	Rundsägeblatt, Ø 50 mm, x-bite
HB 8896-01	Rundsägeblatt, Ø 65 mm, für Gips
HB 8896-02	Rundsägeblatt, Ø 65 mm, x-bite
HB 8898-01	Rundsägeblatt, Ø 80 mm, für Gips
HB 8898-02	Rundsägeblatt, Ø 80 mm, x-bite
HB 8892-01	Segment-Sägeblatt, Ø 65 mm, für Gips
HB 8892-02	Segment-Sägeblatt, Ø 65 mm, x-bite
HB 8890-01	Tailen-Sägeblatt, Ø 65 mm, für Gips
HB 8890-02	Tailen-Sägeblatt, Ø 65 mm, x-bite
HB 8893-01	Tiefen-Sägeblatt, Ø 70 mm, für Gips
HB 8893-02	Tiefen-Sägeblatt, Ø 70 mm, x-bite

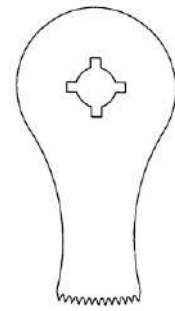

HB 8893-01/-02
Tiefensägeblatt

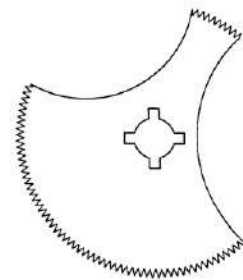

HB 8892-01/-02
Autopsiesägenblatt,
Segment Ø 65 mm

10 Ersatzteile

E 8894-01	Gabelschlüssel
E 8894-02	Halteschraube
E 8894-03	Fixierring
E 8891-01	Inbusschlüssel mit T-Griff
E 8891-02	Inbusschraube für Getriebeteil

11 Service

11.1 Sägenkopf

Zeichnungspositionen beziehen sich auf Abbildung 6

Pos.	Stck.	Bezeichnung	GOLD II Autopsie	
			50-60Hz / 220-240 V	50-60Hz / 110-120 V
			HB 8891	HB 8891V
10	1	Kopfgehäuse gold	E 8810-01GO	
20	1	Hauptwelle/Schwinge (einteilig)	E 8810-20/1	
30	1	Gleitlager vorne	E 8810-12	
40	2	Kopfschraube mit U-Scheibe	E 8810-13	
50	1	Gleitlager hinten	E 8810-15/1	
60	1	Sicherungsring	E 8810-20/2	
70	2	Lagerschraube	E 8810-19	

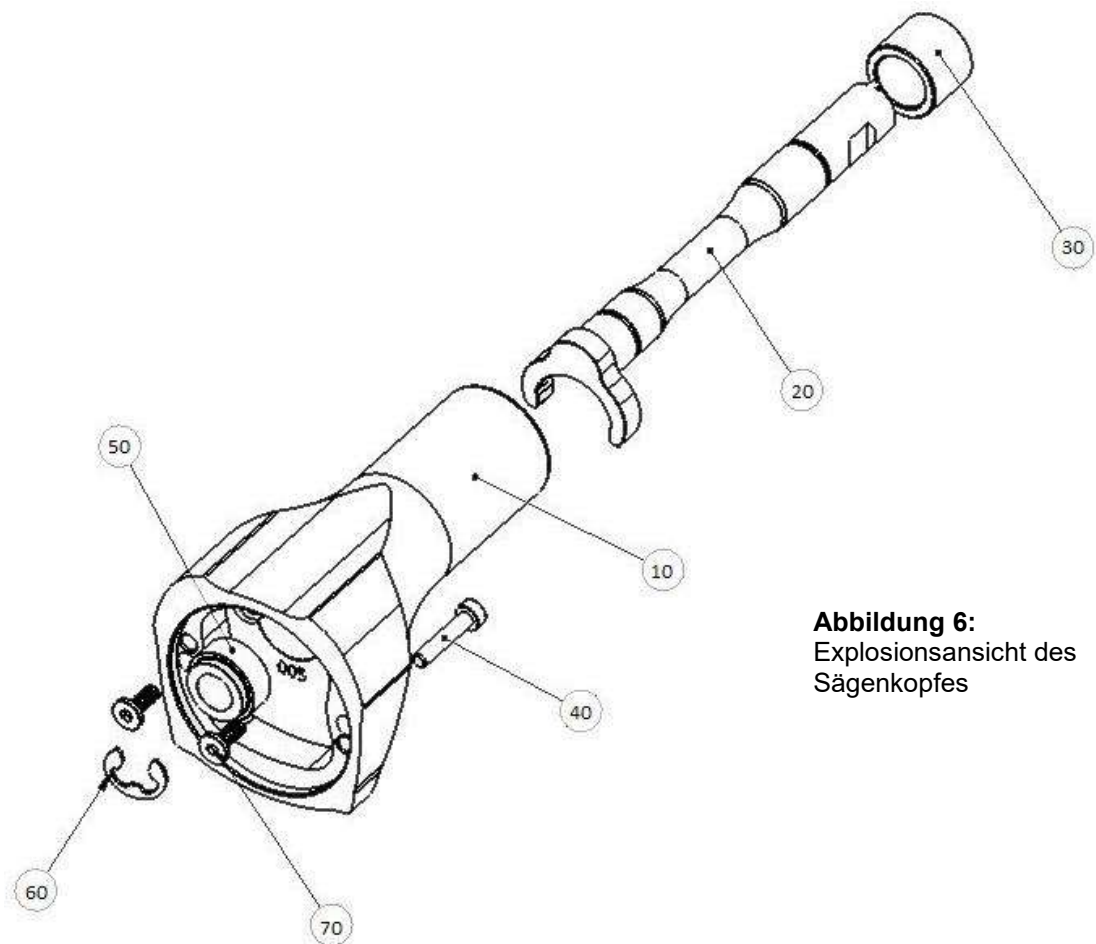


Abbildung 6:
Explosionsansicht des
Sägenkopfes

11.2 Sägenmotor

Die Zeichnungspositionen beziehen sich auf die Abbildungen 7 bis 9, folgende Seite.

Pos.	Stck.	Bezeichnung	GOLD II Autopsie	
			50-60Hz / 220-240 V	50-60Hz / 110-120 V
			HB 8891	HB 8891V
10	1	Motorgehäuse schwarz	E 8820-00SW	E 8820-00SW
20	1	Schaltstange	E 8820-01	E 8820-01
30	1	Schaltschieber	E 8820-02	E 8820-02
40	1	Polpaket m. Wickl.	E 8820-03	E 8820-04
50	2	Ejot-Delta-PT-Schraube	E 8820-05	E 8820-05
60	1	Luftleitring	E 8820-06	E 8820-06
70	2	Bürstenhalter	E 8820-07	E 8820-07
75	2	Steckverteiler	E 8820-08	E 8820-08
80	2	Kohlebürste	E 8820-09	E 8820-09
90	1	Kontaktfeder	E 8820-10	E 8820-10
110	1	Elektronik	E 8820-11	E 8820-12
115	1	Sicherung	E 8820-13	E 8820-14
116	1	Druckpolster für Sicherung	E 8820-15	E 8820-15
130	1	Kabelklemmbrücke	E 8820-16	E 8820-16
150	1	Deckel	E 8820-17SW	E 8820-17SW
155	1	Druckpolster Deckel	E 8820-18	E 8820-18
160	1	Ejot-Delta-PT-Schraube	E 8820-19	E 8820-19
170	5	Ejot-Delta-PT-Schraube	E 8820-20	E 8820-20
190	1	Schutzschlauch	E 8820-21	E 8820-21
250	1	Anker	E 8820-22	E 8820-23
260	1	Rillenkugellager	E 8820-26	E 8820-26
270	1	Rillenkugellager	E 8820-27	E 8820-27
300	1	Zwischenlager	E 8820-28	E 8820-28
310	1	Lagerbuchse	E 8820-29	E 8820-29
320	1	Rillenkugellager	E 8820-32	E 8820-32
330	4	Ejot-Delta-PT-Schraube	E 8820-34	E 8820-34
340	1	Zylinderstift	E 8820-36	E 8820-36
180	1	Kabel Standard "Europe", 3-polig	E 8825-01	-
180	1	Kabel "USA", 2-polig	-	E 8825-02-V
180	1	Kabel "Australia", 3-polig	E 8825-03-A	-
180	1	Kabel "USA", 3-polig	-	E 8825-04-W
180	1	Kabel "UK", 3-polig	E 8825-05-G	-
180	1	Kabel "Switzerland", 2-polig	E 8825-06-S	-
180	1	Kabel „Absaugung“, 2 polig	E 8825-07-C	-
180	1	Kabel „Absaugung“, 2 polig	-	E 8825-07-CV

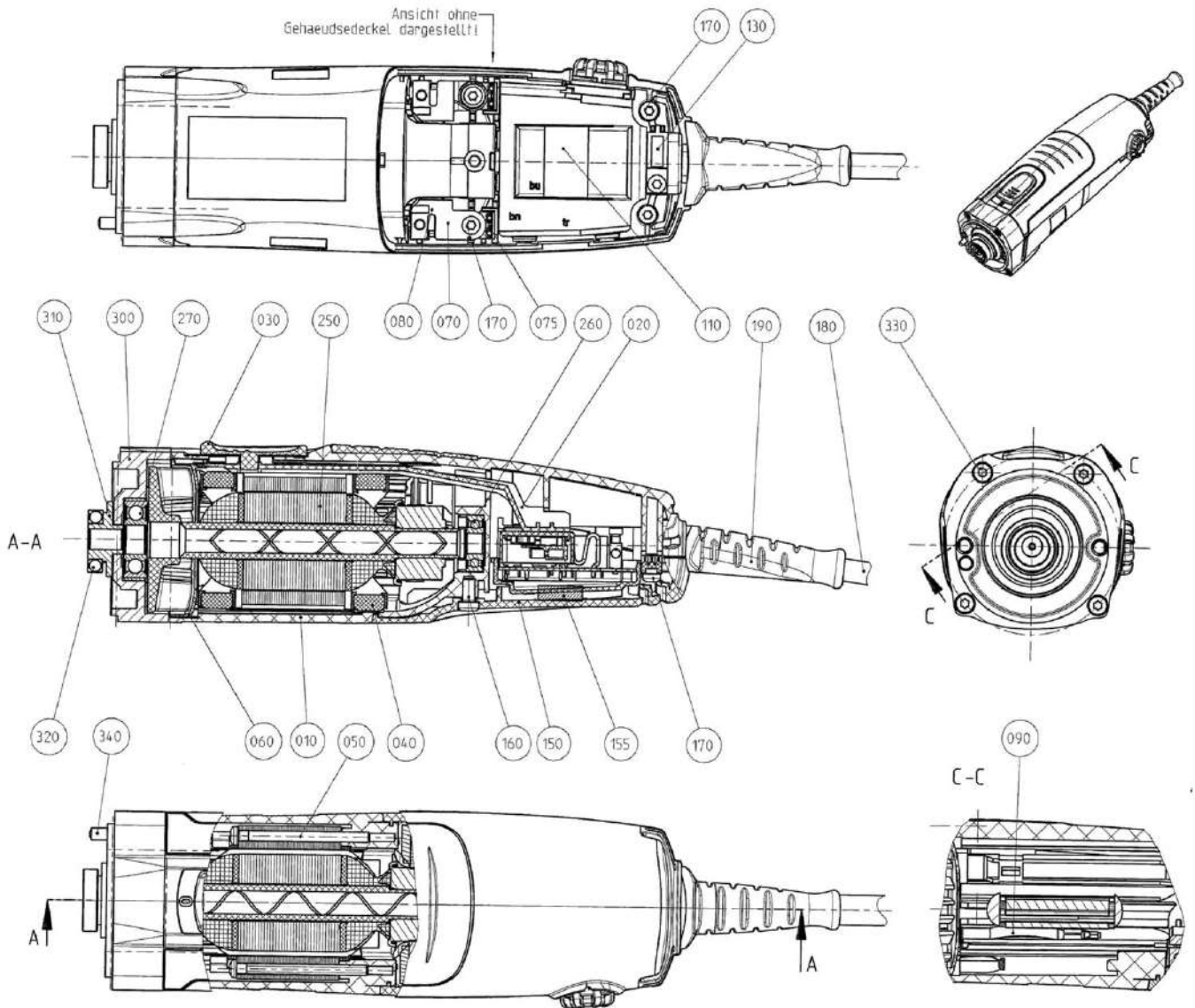


Abbildung 7:
Zeichnung des Motors

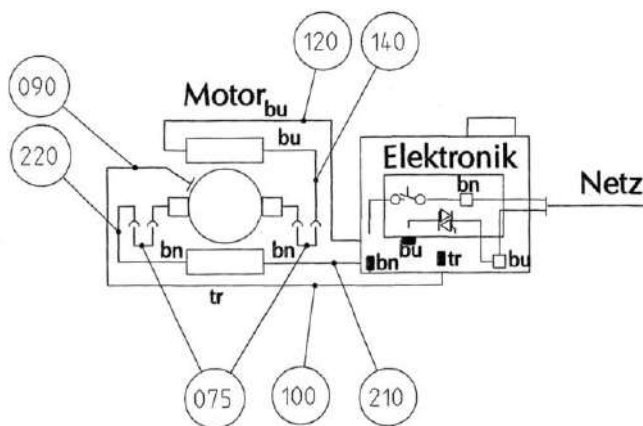


Abbildung 8
Anschlussplan des Motors

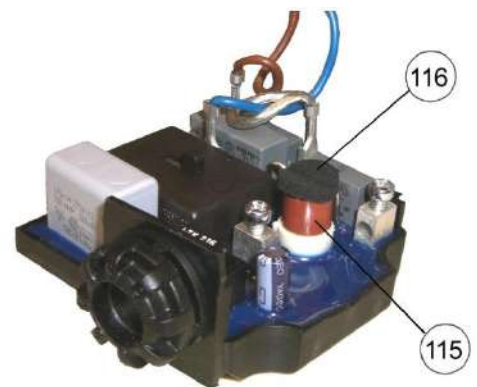


Abbildung 9
Elektronik-Platine

12 Garantie

Für HEBU Gipssägen leisten wir Garantie gemäß den gesetzlichen und länderspezifischen Bestimmungen (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein). Die Garantiezeit beträgt 18 Monate. Im Falle von Material- oder Produktionsfehlern übernehmen wir die kostenlose Instandsetzung des Geräts. Der Garantieanspruch erlischt, falls eigene Reparaturversuche unternommen werden.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder normale Abnutzung entstanden sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen. Bitte wenden Sie sich an unsere Kundendienstabteilung.



Im Garantie- und Reparaturfall legen Sie bitte dem Gerät eine Kopie der Rechnung oder des Lieferscheins bei.

13 Umweltschutz

Führen Sie Verpackungen, ausgediente Geräte und Zubehör einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll gelangen, sondern müssen dem lokalen Entsorgungs- und Recyclingsystem für Elektrogeräte zugeführt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.



14 Technische Daten

Bauart	HB 8891 (A / G / S)	HB 8891 (B / V)
Netzanschluss	220-240 Volt, 50/60 Hz.	110-120 Volt, 50/60 Hz.
Nennaufnahme	250 Watt	250 Watt
Stromart	1 ~	1 ~
Drehzahl Motor	ca. 12000 - 21000 min ⁻¹	ca. 12000 - 21000 min ⁻¹
Oszillation	200-350 Schwingungen / Sekunde	200-350 Schwingungen / Sekunde
Oszillationswinkel	6°	6°
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg
Schutzklasse	II 	II 
Schutzart (IP)	IP2X	
Geräuschpegel (A-bewertet)	Typischerweise 75 dB (A). Der Geräuschpegel beim Arbeiten kann 85 dB (A) überschreiten. Ab 85 dB (A) Gehörschutz tragen!	
Hand-Arm-Vibration	Typischerweise niedriger als 2,5 m/s ² . Messwerte ermittelt nach EN 50 144.	

15 Service- und Herstelleradresse

Sollte die hier vorliegende Gebrauchsanweisung in Papierform benötigt werden, verwenden Sie bitte die unten aufgeführten Kontaktdaten. Die Gebrauchsanweisung in Papierform wird Ihnen nach Erhalt der Anforderung innerhalb von sieben Kalendertagen zur Verfügung gestellt.

Alternativ kann die elektronische Gebrauchsanweisung auch selbst ausgedruckt werden.



HEBUmedical GmbH
Badstraße 8
78532 Tuttlingen / Germany
Tel. +49 7461 94 71 - 0
eMail: service@HEBUmedical.de
Web: www.HEBUmedical.de



- HB 8891-A*
- HB 8891-B*
- HB 8891-G*
- HB 8891-S*
- HB 8891-V*

Oscillating cast cutting saw

HEBU Oscillo-Saw GOLD II Autopsy






Content

1	Symbol descriptions.....	21
2	Scope of delivery	21
3	Safety remarks.....	22
4	Scope.....	22
4.1	Intended Use	22
4.2	Contraindication	23
5	Mounting / exchanging the saw blade	23
5.1	Releasing the retaining screw / removing the old saw blade.....	23
5.2	Inserting the new saw blade.....	24
6	Operation	24
6.1	Opening plaster casts	25
6.2	For the autopsy	25
7	Cleaning and maintenance	26
7.1	The use of the cast saw.	26
7.2	The use of the autopsy saw:	26
8	Sterilization	27
9	Accessories.....	28
10	Spare Parts.....	28
11	Servicing	29
11.1	Saw head	29
11.2	Saw motor	30
12	Warranty	32
13	Environmental protection	32
14	Specifications.....	32
15	Manufacturer and servicing address.....	32



HEBU
oscillating saw
GOLD II
Autopsy

1 Symbol descriptions

Symbol	Definition
	CE-labelling
	Attention
	Manufacturer
	WEEE-labelling
 Hinweis auf eIFU	(Electronic) instruction for use











2 Scope of delivery

HB 8891	HEBU oscillating cast cutting saw GOLD II Autopsy
HB 8892-01	Segment saw blade, \varnothing 65 mm
HB 8893-01	Deep saw blade, \varnothing 70 mm, for plaster casts
HB 8877	Special grease, 8 g tube
E 8894-01	2 x open end wrenches
E 8891-03	Torx-wrench with T-handle
	Instruction manual

3 Safety remarks

Our products are exclusively intended for professional use in accordance with their intended Purpose by appropriately trained and qualified personnel and may only be acquired by them.

All safety remarks in these operating instructions are marked with the symbol  .

	This product is NOT a medical device according to (EU) 2017/745.
	Before using the saw, carefully read through these operating instructions and the valid national occupational safety regulations and act accordingly. <i>Please keep these operating instructions for later reference and always include them if the device is sold or passed on to third parties.</i>
	Application in accordance with the intended application: This device is intended for sawing open plaster casts or autopsy.
	Never rivet or screw signs or symbols onto the device, as this can render the protective insulation ineffective. We recommend using adhesive signs.
	Only ever use undamaged plugs and cables. Check cables and plugs regularly.
	The mains voltage and specified voltage rating shown at the device must be in agreement.
	Only ever use original accessories.
	Wear personal protective gear such as protective goggles, ear protectors and gloves.
	The device must not be operated in areas at risk from explosion.
	Avoid improper throwing or dropping of the product.

4 Scope

The use of oscillating autopsy saws mainly takes place in autopsies.

4.1 Intended purpose

A hand-held, current-driven (AC) product for cutting gypsum or synthetic material usually during the removal of a plaster cast. The proximal end (the handle) is usually cylindrical, while the distal end terminates in a round, crescent-shaped, or circular blade suitable for cutting plaster casting material. The leaves cut as an electric motor in the handle drives them (swinging). The cut is done by vibration rather than by sawing.

4.2 Contraindication

There are no known contraindications.

5 Mounting / exchanging the saw blade



**Danger of injury due to unintentional activation.
Pull out the plug before changing the saw blade.
If applicable use thick gloves to prevent injury when handling the saw blade.
Only ever connect the HEBU oscillating cast cutting saw to the mains when it is switched off.**

5.1 Releasing the retaining screw / removing the old saw blade

1. Place the cast cutting saw on a stable underlay (table).
2. Apply one fork wrench at the drive shaft behind the saw blade, and the other one at the front at the retaining screw (see fig. 1).
3. Hold the rear wrench firmly and use it to fix the cast cutting saw.
4. Release the retaining screw using the front wrench.
5. Remove the retaining screw and the fixing ring. Ensure that you do not lose any components.
6. If applicable, remove the old saw blade.



Fig. 1:
Releasing the retaining screw

5.2 Inserting the new saw blade

1. Check that the female thread and saw blade support of the drive shaft are clean.
2. Position the new saw blade.
It makes no difference which side of the saw blade is facing inwards or outwards.

Important!

The notches in the saw blade must be positioned precisely flush on the spigots of the drive shaft.

3. Position the fixing ring. The notches in the fixing ring must always be pointing towards the saw (see fig. 2). These must also be positioned precisely on the spigots.
4. Screw the retaining screw in manually until hand tight.
5. Then tighten firmly using the fork wrench, as described above.
The tightening torque is 6 – 7 Nm. Caution! Do not overtighten.



Fig. 2:
Inserting the saw blade

6 Operation

Switching on and off (see fig. 3)

- Switching on: Push the switch forwards (I)
Switching off: Push the switch back (0)



Fig. 3

Setting the oscillating frequency (see fig. 4)

Select the oscillating frequency when the motor is running. The optimum oscillating frequency can be selected at the speed gauge depending on the properties of the plaster cast.

Oscillating frequency preselection using the electronic speed gauge.

- Lowest oscillating frequency (1)
Highest oscillating frequency (8)



Fig. 4

6.1 Opening plaster casts

First select a suitable saw blade.

Apply the HEBU oscillating saw with the saw blade mounted to the cast you wish to open and press in lightly. Your guiding hand can be used as a support and for depth control, and to prevent sudden penetration of the blade when the cast has been cut through.

As long as the saw blade is cutting through the plaster, you will be able to feel a resistance. Once the plaster cast has been cut through, this resistance disappears. Once the breakthrough point is tangible, lift the saw blade off lightly without removing it from the cutting groove and move it forwards appr. 15 mm in the direction of cutting.

Then apply the blade again and proceed as described above until the next piece has been cut through.

In this way, the plaster cast is more safely opened through a series of cuts and linear movements along the cutting line than would be the case if executing a continuous linear cut.

After you have used the saw only a few times, you will become accustomed to guiding the saw through the plaster cast and you will also develop an instinctive feel for the moment where no further resistance is tangible and no further pressure should be applied to the saw blade.

Additional remarks:

- Because different materials are used, every plaster or plastic cast has different properties. While working, try to determine the optimum speed for the respective material.
- A lower speed is advantages when cutting through plastic casts. This prevents the plastic from starting to melt due to friction heat generated during cutting.
- Metal rails inserted in the plaster cast should not be cut.
- While serving, check the retaining screw for a firm fit and if necessary tighten.
- If the motor is overloaded, the device is automatically switched off. The fuse (see fig. 9 on page 31, item 110) is located on the electronic circuit board (see fig. 7 on page 31, item 110) and can be quickly and easily exchanged after unscrewing the housing.
- Used and blunt saw blades place excessive stress on the motor and should consequently be continuously checked and exchanged in good time.
- To ensure even wear of the saw blade, open the retaining screw and turn the saw blade by 90°.


6.2 For the autopsy

The oscillating saw is used in the autopsy for cutting bones. The guiding of the saw is described in 4.1.

In pathological use, hard bandages can be also opened with the Autopsy saw if necessary.

Please note also the additional information in 4.1!

7 Cleaning and maintenance



Danger of injury through unintentional activation.

Pull out the plug before any cleaning or maintenance work.

Wipe disinfection is suitable for motor housing, cable, power plug and all accessories, such as saw blades and an open-end wrench. For this purpose, we recommend products with a pH-value within 9-10, e.g. MediClean forte from Dr. Weigert.

It is important to ensure that the device is disconnected from the power supply and the disinfecting liquid does not enter the interior of the motor.



Fig. 5

7.1 The use of the cast saw.

The following measures should be performed once a week or more often if the saw is used frequently:


Clean the cooling slots (see fig. 5) to ensure sufficient ventilation for cooling the motor. Clean the motor compartment from the outside with a jet of dry compressed air.

7.2 The use of the autopsy saw:

The saw should be cleaned after every use. An efficient cleaning can only be made if you remove the saw blade. (Compare 3.1 Releasing the retaining screw/ removing the old saw blade). Remove the two head screw. The retaining screws, fixation ring and saw blade have to be removed. Take off the saw head (compare fig. 10).



Fig. 10



Warning!


Please use thick gloves to prevent injury when handling the saw blade

For the machine cleaning the saw head should lie down horizontal- compare fig. 11. The machine cleaning should be effected with a standard cleaning program. The cleaning agent must have a pH-value of <10, otherwise the surface coating will be damaged.

For the manual cleaning use plastic brushes and /or cleaning pistols. Do not use cleaning agents with fixing effect. The pH-value should be also <10, so that the surface coating won't be damaged. Wash the saw head with fully demineralized water. Then use disinfectant.



Fig. 11



The preparation and sterilization is only allowed for the saw head! Not for the electrical motor!

Furthermore clean the cooling slots (see fig.5) to ensure sufficient ventilation for cooling the motor. Clean the motor compartment from the outside with a jet of dry compressed air. After the sterilization the construction takes place.

8 Sterilization

Only autoclave the saw head (gear part) in steam!

Do not autoclave the electrical motor. It should not come in contact with water, respectively other liquids, or their steam.

Disassembly:

Remove the retaining screw, fixation ring and saw blade. Loosen the two Allen screws and unscrew completely.

Take off the saw head (gear part), it can now be autoclaved as follows:

Prior to sterilization, products must undergo cleaning and disinfection, be rinsed off without residue using demineralized water and subsequently dried. HEBUmedical recommends using a validated steam sterilization process (e.g. sterilizer in compliance with EN 285 and validated in accordance with DIN EN ISO 17665-1).

On using the fractionated vacuum method, **sterilization** must be performed with at least **134°C (USA 132° C)** with a **minimum dwell period of 3 minutes**. Vacuum drying must then be carried out for at least 20 minutes.

Reassembly:


Is done in reverse order. It is important to make sure that the wing is lightly greased with about 1ml HB 8877 before reassembly. Furthermore the screws must be tightened with 6 Nm.




Attention: Plugging the saw head to the motor is done by pressing with slight back- and forth movements until the wing is locked outside the groove ball bearing.

9 Accessories

HB 8899-01	Transportation case with insert
HB 8889-01	Retrofit kit (vacuum cleaner, hose, suction unit, tool), 220-240V
HB 8889-01V	Retrofit kit (vacuum cleaner, hose, suction unit, tool), 100-120V
HB 8878-01	Patent Screw
HB 8895-03	Round saw blade TITANIUM, Ø 50 mm
HB 8896-03	Round saw blade, TITANIUM, Ø 65 mm
HB 8895-04	Round saw blade "non-stick", Ø 50 mm
HB 8896-04	Round saw blade, "non-stick", Ø 65 mm
HB 8897-01	Round saw blade, Ø 44 mm, for plaster
HB 8897-02	Round saw blade, Ø 44 mm, x-bite
HB 8895-01	Round saw blade, Ø 50 mm, for plaster
HB 8895-02	Round saw blade, Ø 50 mm, x-bite
HB 8896-01	Round saw blade, Ø 65 mm, for plaster
HB 8896-02	Round saw blade, Ø 65 mm, x-bite
HB 8898-01	Round saw blade, Ø 80 mm, for plaster
HB 8898-02	Round saw blade, Ø 80 mm, x-bite
HB 8893-01	Deep saw blade, Ø 70 mm, for plaster
HB 8893-02	Deep saw blade, Ø 70 mm, x-bite
HB 8892-01	Segmental saw blade, Ø 65 mm, for plaster
HB 8892-02	Segmental saw blade, Ø 65 mm, x-bite
HB 8890-01	Waisted saw blade, Ø 65 mm, for plaster
HB 8890-02	Waisted saw blade, Ø 65 mm, x-bite

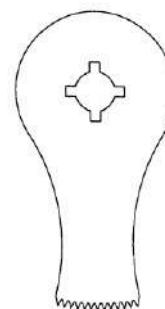

HB 8893-01/-02
Autopsy saw blade

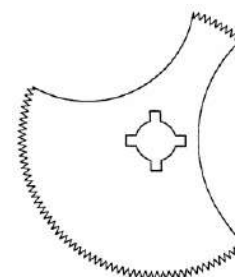

HB 8892-01/-02
Segment saw blade,
Ø 65 mm

10 Spare Parts

E 8894-01	Fork wrench
E 8894-02	Retaining screw
E 8894-03	Fixing ring
E 8891-01	Allen wrench with T-handle
E 8891-02	Allen screw for gear part

11 Servicing

11.1 Saw head

Drawing items refer to fig. 6

Pos.	Pc.	Description	GOLD II Autopsy	
			50-60Hz / 220-240 V	50-60Hz / 110-120 V
			HB 8891	HB 8891V
10	1	Saw head housing	E 8810-01GO	
20	1	main shaft / Fork	E 8810-20/1	
30	1	Front floating bearing	E 8810-12	
40	2	Head Screw with washer	E 8810-13	
50	1	Back floating bearing	E 8810-15/1	
60	1	retaining ring	E 8810-20/2	
70	2	Bearing screw	E 8810-19	

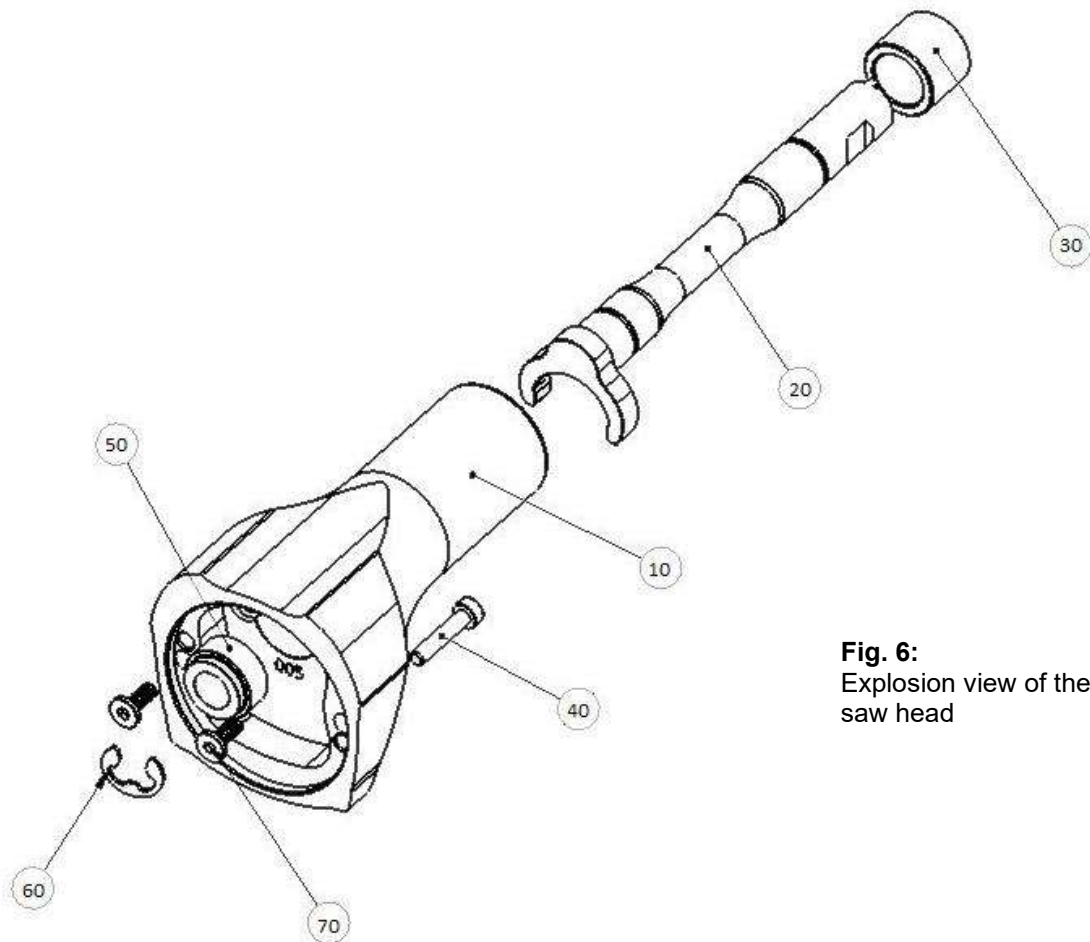


Fig. 6:
Explosion view of the saw head

11.2 Saw motor

The drawing items refer to fig. 7 to 9, next page.

Pos.	Pc.	Description	GOLD II Autopsy	
			50-60Hz / 220-240 V	50-60Hz / 110-120 V
			HB 8891	HB 8891V
10	1	Motor housing	E 8820-00SW	E 8820-00SW
20	1	Switching rod	E 8820-01	E 8820-01
30	1	Switching slide	E 8820-02	E 8820-02
40	1	Pole housing with winding	E 8820-03	E 8820-04
50	2	Ejot Delta PT screw	E 8820-05	E 8820-05
60	1	Air guiding ring	E 8820-06	E 8820-06
70	2	Brush holder	E 8820-07	E 8820-07
75	2	Plug connector	E 8820-08	E 8820-08
80	2	Carbon brush	E 8820-09	E 8820-09
90	1	Contact spring	E 8820-10	E 8820-10
110	1	Electronic circuit	E 8820-11	E 8820-12
115	1	Fuse	E 8820-13	E 8820-14
116	1	Pressure pad for fuse	E 8820-15	E 8820-15
130	1	Cable clamping bridge	E 8820-16	E 8820-16
150	1	Lid	E 8820-17SW	E 8820-17SW
155	1	Pressure pad for lid	E 8820-18	E 8820-18
160	1	Ejot Delta PT screw	E 8820-19	E 8820-19
170	5	Ejot Delta PT screw	E 8820-20	E 8820-20
190	1	Protective hose	E 8820-21	E 8820-21
250	1	Anchor	E 8820-22	E 8820-23
260	1	Deep groove ball bearing	E 8820-26	E 8820-26
270	1	Deep groove ball bearing	E 8820-27	E 8820-27
300	1	Intermediate bearing	E 8820-28	E 8820-28
310	1	Bearing bush	E 8820-29	E 8820-29
320	1	Deep groove ball bearing	E 8820-32	E 8820-32
330	4	Ejot Delta PT screw	E 8820-34	E 8820-34
340	1	Parallel pin	E 8820-36	E 8820-36
180	1	Cable standard "Europe", 3-pin	E 8825-01	-
180	1	Cable „USA“, 2-pin	-	E 8825-02-V
180	1	Cable „Australia“, 3-pin	E 8825-03-A	-
180	1	Cable „USA“, 3-pin	-	E 8825-04-W
180	1	Cable „UK“, 3-pin	E 8825-05-G	-
180	1	Cable „Switzerland“, 2-pin	E 8825-06-S	-
180	1	Cable „Aspiration“, 2 pin	E 8825-07-C	-
180	1	Cable „Aspiration“, 2 pin	-	E 8825-07-CV

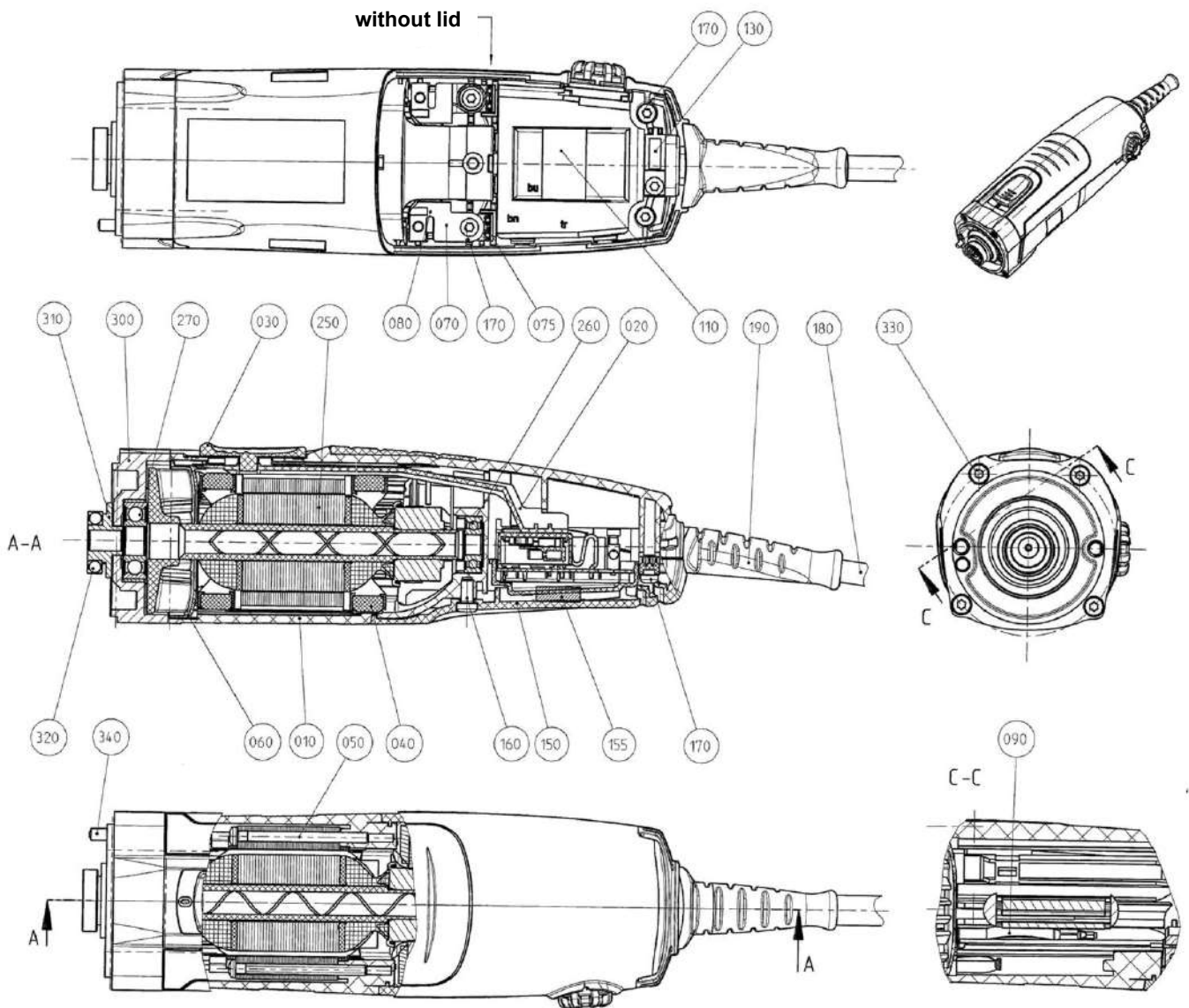


Fig 7:
Motor drawing

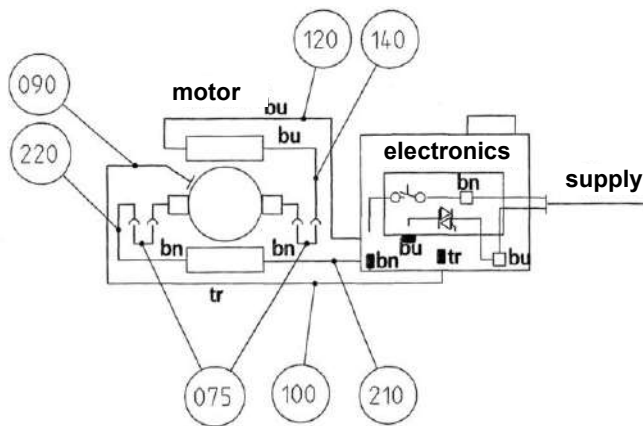


Fig 8
Motor terminal plan

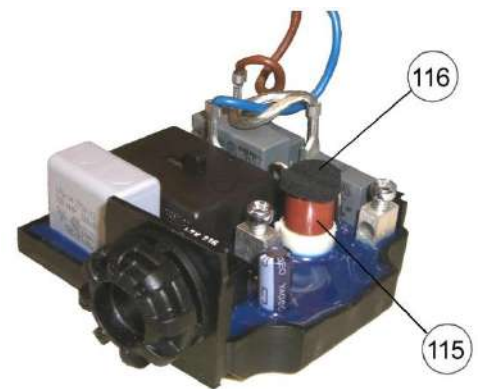


Fig 9:
Electronic circuit

12 Warranty

We provide a guarantee for HEBU cast cutting saws in accordance with statutory and country-specific legislation (proof of purchase by invoice or delivery note). The period of warranty is 18 months. In the event of material or production defects, we provide free repair of the device. Any attempt to carry out unauthorized repairs will result in forfeiture of your warranty cover.

Damage caused by incorrect handling, overloading or normal wear and tear is not covered by the warranty. Please contact our aftersales service department.



In case of warranty claims and repairs, please enclose a copy of the invoice or delivery note with the device.

13 Environmental protection

Any packaging materials, disused devices and accessories must be sent for environmentally friendly recycling or disposal. Electrical devices may not be disposed of with the household waste but taken to the local disposal and recycling facility for electrical devices. For more information on this subject, consult your specialist dealer.



14 Specifications

Model	HB 8891 (A / G / S)	HB 8891 (B / V)
Mains connection	220-240 Volt, 50/60 Hz.	110-120 Volt, 50/60 Hz.
Rated current consumption	250 Watt	250 Watt
Current type	1 ~	1 ~
Motor speed	ca. 12000 – 21000 min ⁻¹	ca. 12000 – 21000 min ⁻¹
Oscillation	200-350 cycles / sec	200-350 cycles / sec
Oscillation arc degree	6°	6°
Weight	1,3 kg	1,3 kg
Protection class	II 	II 
IP Code	IP2X	
Noise level (A-graded)	Typically 75 dB (A). The noise level during sawing can exceed 85 dB (A). From 85 dB (A), wear ear protectors!	
Hand-arm vibration	Typically lower than 2.5 m/s ² . Measured values determined in accordance with EN 50 144.	

15 Manufacturer and servicing address

Should you require the instructions for use in paper form, please use the contact details below. The instructions for use in paper form will be made available to you within seven calendar days of receipt of the request.

Alternatively, you can print out the electronic instructions for use yourself.



HEBUmedical GmbH
 Badstraße 8
 78532 Tuttlingen / Germany
 Tel. +49 7461 94 71 - 0
 eMail: service@HEBUmedical.de
 Web: www.HEBUmedical.de



HB 8891-A
HB 8891-B
HB 8891-G
HB 8891-S
HB 8891-V

Scie oscillatrice à plâtre

HEBU Scie oscillatrice GOLD II Autopsie







Sommaire

1	Explications des symboles.....	35
2	Étendue de la livraison	35
3	Consignes de sécurité	36
4	Application	36
4.1	Utilisation prévue.....	36
4.2	Contre-indications	37
5	Monter / remplacer la lame de scie.....	37
5.1	Ouvrir la vis de maintien / enlever l'ancienne lame de scie	37
5.2	Placer la nouvelle lame de scie	38
6	Manipulation.....	38
6.1	Ouvrir des bandages durs.....	39
6.2	Utilisation comme scie oscillante à autopsie.....	39
7	Nettoyage et entretien	40
7.1	Utilisation comme scie oscillante à plâtre	40
7.2	Utilisation comme scie oscillante à autopsie.....	40
8	Stérilisation	41
9	Accessoires.....	42
10	Pièce de rechange	42
11	Service	43
11.1	Tête de scie.....	43
11.2	Moteur de la scie.....	44
12	Garantie	46
13	Protection de l'environnement	46
14	Données techniques	46
15	Adresse du fabricant et du service après-vente	46



HEBU
Scie oscillatrice
GOLD II
Autopsie

1 Explications des symbols


Symbol	Definition
	Marquage CE
	Attention
	Fabricant
	Marquage WEEE
 /  Hinweis auf eIFU	(Électronique) mode d'emploi











2 Étendue de la livraison

HB 8891	Scie oscillatrice HEBU GOLD II AUTOPSIE
HB 8892-01	Lame de scie à segment, Ø 65 mm , pour le pâte
HB 8893-01	Lame de scie de profondeur, Ø 70 mm, pour le pâte
HB 8877	Tube avec graisse special, 8 g
E 8894-01	2 clés plates
E 8891-03	Clé Torx avec T-manche
	Notice d'utilisation

3 Consignes de sécurité

Nos produits sont exclusivement destinés à un usage professionnel conforme à leur destination par du personnel spécialisé formé et qualifié, et ne peuvent être achetés que par ce dernier.

Toutes les consignes de sécurité de cette notice d'utilisation sont marquées d'un  .

	Ce produit n'est PAS un dispositif médical selon (EU) 2017/745.
	Avant toute utilisation, veuillez lire cette notice d'utilisation ainsi que les dispositions nationales en vigueur sur le travail et travaillez aussi en les respectant. <i>Veuillez conserver cette notice d'utilisation pour un usage ultérieur et joignez-la à l'appareil en cas de transmission ou revente.</i>
	Utilisation conforme aux prescriptions : Cet appareil est conçu pour scier des bandages durs ou Autopsie.
	Il ne faut ni riveter ni visser des plaques ou des signes sur l'appareil. L'isolation de protection peut être sinon rendue inefficace. Il est recommandé d'utiliser des plaques autocollantes.
	Utiliser uniquement des prises et des câbles qui ne sont pas endommagés. Vérifiez régulièrement les 36écés et les prises.
	La tension du réseau et l'indication de tension sur l'appareil doivent correspondre.
	N'utiliser que des accessoires d'origine.
	Porter un équipement de protection personnel, des lunettes de protection, une protection auditive et des gants.
	L'appareil ne doit pas être utilisé dans des secteurs à risque d'explosion.
	Évitez de jeter ou de laisser tomber les produits de manière inappropriée.

4 Application

Les scies à autopsie oscillantes sont principalement utilisées pour les autopsies.

4.1 Utilisation prévue

Un produit portatif à moteur (AC) pour couper le gypse ou un matériau synthétique, habituellement lors de l'enlèvement d'un plâtre. L'extrémité proximale (la poignée) est généralement cylindrique, tandis que l'extrémité distale se termine par une lame ronde, en forme de croissant ou de cercle adaptée à la coupe de matériau de moulage en plâtre. Les feuilles coupées comme un moteur électrique dans la poignée les entraîne (balançant). La coupe se fait par vibration plutôt que par sciage.

4.2 Contre-indications

Aucune contre-indication n'est connue

5 Monter / remplacer la lame de scie



Risque de blessures en cas de mise en marche involontaire. Débranchez la prise électrique avant de remplacer la lame. Utilisez éventuellement des gants robustes pour que vous ne vous blessiez pas avec la lame de scie. La scie oscillante HEBU ne devra être branchée que lorsqu'elle est sur arrêt.

5.1 Ouvrir la vis de maintien / enlever l'ancienne lame de scie

1. Placez la scie sur une surface stable (table).
2. Placez une clé plate sur l'arbre d'entraînement derrière la lame de scie, et la deuxième clé, devant, sur la vis de maintien (Cf. fig. 1).
3. Maintenez fermement la clé de derrière et utilisez-la pour fixer la scie.
4. Ouvrez la vis de maintien avec la clé de devant.
5. Enlevez la vis de maintien et la bague de fixation. Veillez à ce qu'aucune pièce ne soit perdue.
6. Si nécessaire, enlevez l'ancienne lame de scie.



Fig. 1 :
Desserrer la vis de maintien

5.2 Placer la nouvelle lame de scie

1. Vérifiez que le filetage intérieur et la surface d'appui de la lame de scie de l'arbre d'entraînement sont propres.
2. Placer la nouvelle lame de scie.
Le sens d'orientation de la lame vers l'extérieur ou l'intérieur n'a aucune importance.

Important !

Les coches dans la lame de scie doivent se trouver exactement sur les deux tétons de l'arbre d'entraînement.

3. Placez la bague de fixation. Les coches de la bague de fixation doivent toujours être orientées vers la scie (Cf. fig. 2). Ces coches doivent aussi se trouver exactement sur les tétons.
4. Vissez à la main la vis de maintien et serrez la légèrement.
5. Ensuite, à l'aide de la clé plate, comme décrit ci-dessus, serrez.
Le couple de serrage est de 6 à 7 Nm. Attention ! Ne pas serrer trop fort.



Fig. 2 :
Mise en place de la lame de scie

6 Manipulation

Mise en marche / Arrêt (fig. 3)

Mise en marche : pousser le contacteur vers l'avant (1)
Arrêt : pousser le contacteur vers l'arrière (0)



Fig. 3

Régler la fréquence d'oscillation (fig. 4)

Sélectionner la fréquence d'oscillation, moteur en marche.
Avec le régulateur de vitesse de rotation, il est possible de régler de manière optimale la fréquence d'oscillation selon les propriétés de l'étoffe du bandage.

Présélection de la fréquence d'oscillation avec régulateur de vitesse de rotation.

La plus faible fréquence d'oscillation (1)
La plus forte fréquence d'oscillation (8)



Fig. 4

6.1 Ouvrir des bandages durs

Pour commencer, choisissez la lame de scie adaptée.

Poser la scie oscillante HEBU avec la lame de scie montée sur le bandage à ouvrir et appuyer légèrement. La main de guidage peut être utilisée comme appui et pour l'appréciation de la profondeur. Elle empêche aussi une pénétration brusque lorsque le bandage est découpé.

Tant que la lame de scie coupe le plâtre, on ressent une résistance. Lorsque le plâtre est découpé, la résistance disparaît. Lorsque ce percement est sensible, la lame de scie est légèrement relevée sans être retirée de la fente de découpage. On l'avance ensuite d'environ 15 mm dans le sens de la coupe. Ensuite, on la replace et on procède comme décrit ci-dessus jusqu'à ce que le prochain morceau soit découpé.

Le bandage en plâtre est ainsi ouvert d'une façon plus sûre par une série de découpes et de mouvements linéaires le long de la ligne de découpe que par une coupe linéaire continue.

Au bout de quelques applications, vous prenez l'habitude pour guider la scie dans le bandage de plâtre ainsi que pour ressentir le moment où la lame de scie n'est plus en force, c'est-à-dire le moment où la résistance n'est plus sensible.

Remarques supplémentaires :

- En raison des différentes matières, presque chaque bandage en plâtre ou en matière synthétique présente différentes propriétés. Durant le travail, essayez de trouver la vitesse de rotation optimale.
- Pour les bandes en matière synthétique, il est préférable de régler une faible vitesse de rotation. Ainsi, vous empêchez que la matière synthétique commence à fondre lors du découpage en raison de la chaleur de frottement.
- Les broches métalliques placées dans le plâtre ne devront pas être découpées.
- Pendant que vous sciez, vérifiez que la vis de maintien est bien en place et, si nécessaire, resserrez-la.
- En cas de surcharge du moteur, l'appareil s'arrête automatiquement. Le fusible (Cf. fig. 9 page 45, Pos. 115) se trouve sur la platine électronique (Cf. fig. 7 page 45, Pos. 110) et peut être remplacé très rapidement en dévissant le boîtier.
- Les lames de scie usées, émoussées provoquent des surcharges pour le moteur et, pour cette raison, il faut toujours les vérifier et les remplacer à temps.

Pour avoir une usure régulière de la lame de scie, ouvrez la vis de maintien et retournez la lame de scie de 90°.

6.2 Utilisation comme scie oscillante à autopsie

La scie oscillante est employée en l'autopsie, pour cisailer et couper les os. Le guidage de la scie est comme décrit en 4.1.

En cas d'utilisation pathologique, les bandages durs peuvent être ouverts avec la scie pour l'autopsie si nécessaire.

Faites attention à l'information additionnelle s'il vous plaît.

7 Nettoyage et entretien



Risque de blessure en cas de mise en marche involontaire. Débranchez la prise électrique avant d'effectuer des travaux de nettoyage et d'entretien.



Fig. 5

La désinfection par essuyage convient pour les boîtiers de moteur, les câbles, les prises de courant et tous les accessoires tels que les lames de scie et les clés à fourche. Pour cela, nous recommandons des produits dont le pH se situe entre 9 et 10, par exemple MediClean forte de Dr. Weigert.

Assurez-vous que l'appareil est débranché de l'alimentation électrique et que le liquide désinfectant ne pénètre pas à l'intérieur du moteur.

7.1 Utilisation comme scie oscillante à plâtre

Les travaux suivants devront être effectués une fois par semaine en cas d'usage fréquent, plus souvent : Nettoyer les ouvertures de l'air de refroidissement (Cf. fig. 5) pour garantir une ventilation suffisante pour le refroidissement du moteur. Souffler l'espace moteur depuis l'extérieur avec de l'air comprimé sec.

7.2 Utilisation comme scie oscillante à autopsie

Après un usage il convient de faire un nettoyage. Seulement avec l'arme de scie démonte, le nettoyage est profondément (cf. 3.1 Ouvrir la vis de maintien/enlever l'ancienne lame de scie). Ad hoc il faut dévisser les deux vis. Il faut enlever la vis à tête hexagonale, le circlip et l'arme de scie. Tirez-vous la tête de la scie (partie de transmission). (cf. fig. 10).



Fig.10



Risque de blessures ! Utilisez éventuellement des gants robustes pour que vous ne vous blessiez pas avec la lame de scie.

Pour le nettoyage mécanique il faut poser la tête de la scie à horizontale (cf. fig. 11). Le nettoyage mécanique doit s'effectuer avec un program standard. Le produit de nettoyage doit avoir un pH de <10, autrement le surface revêtement est abîmé.

Pour le nettoyage manuel il faut des brosses synthétiques et/ou des pistolets de nettoyage. N'utilisez pas des produits fixateurs. Il faut avoir un pH <10, pour que le surface n'abîme pas revêtement. La tête de la scie doit être rincée avec l'eau osmosée. Ensuite, traitez-le avec désinfectant.



Fig.11



La préparation et la stérilisation sont seulement autorisées pour la tête de la scie ! Pas pour le moteur électrique !

Les ouvertures de l'air de refroidissement doivent être nettoyé (cf. fig 5), pour garantir une ventilation suffisante pour le refroidissement du moteur. Après de la stérilisation se fait la monte de l'arme de scie.

8 Stérilisation

Stérilisez –vous seulement la tête de la scie (partie de transmission) dans vapeur !

N'est stériliser le moteur électrique, ni l'entrez pas en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ainsi que leur vapeurs.

Démontage :

Enlevez la vis hexagonale, le circlip et la lame de scie. Desserriez les deux vis Allen complètement Tirez-vous la tête de la scie (transmission), alors on la peut stériliser comme suit:

Avant la stérilisation, la tête de la scie doit être nettoyés et désinfectés, puis rincés sans résidus à l'eau déminéralisée et enfin séchés. HEBUmedical recommande d'utiliser un procédé de stérilisation à la vapeur validé (par exemple, un stérilisateur conforme à la norme EN 285 et validé selon la norme DIN EN ISO 17665-1).

En cas d'utilisation de la méthode du vide fractionné, la **stérilisation** doit être effectuée à une température d'au moins **134°C (USA 132°C)** avec un **temps de séjour minimum de 3 minutes**. Le séchage sous vide doit ensuite être effectué pendant au moins 20 minutes.

Montage :

Seulement payiez attention que l'aile va être bien lubrifier avec environ 1ml de la graisse HB 8877 avant le montage.


Les vis doivent être visser avec 6Nm.




Attention: Mettre la tête de la scie au moteur se fait en appuyant avec balancer légèrement jusqu'à ce que l'aile est enclenchée à l'extérieur du roulement à billes rainuré avec leurs appuis.

9 Accessoires

HB 8899-01	Mallette mat. Synthétique compartimentée
HB 8889-01	Kit d'équipement (Aspirateur, tuyau, cloche d'aspiration, outil), 220-240V
HB 8889-01V	Kit d'équipement (Aspirateur, tuyau, cloche d'aspiration, outil), 100-120V
HB 8878-01	Clé brevetée
HB 8895-03	Lame de scie circulaire TITANIUM, Ø 50 mm
HB 8896-03	Lame de scie circulaire TITANIUM, Ø 65 mm
HB 8895-04	Lame de scie circulaire « non-stick » Ø 50 mm
HB 8896-04	Lame de scie circulaire « non-stick » Ø 65 mm
HB 8897-01	Lame de scie circulaire, Ø 44 mm, pour le plâtre
HB 8897-02	Lame de scie circulaire, Ø 44 mm, x-bite
HB 8895-01	Lame de scie circulaire, Ø 50 mm, pour le plâtre
HB 8895-02	Lame de scie circulaire, Ø 50 mm, x-bite
HB 8896-01	Lame de scie circulaire, Ø 65 mm, pour le plâtre
HB 8896-02	Lame de scie circulaire, Ø 65 mm, x-bite
HB 8898-01	Lame de scie circulaire, Ø 80 mm, pour le plâtre
HB 8898-02	Lame de scie circulaire, Ø 80 mm, x-bite
HB 8892-01	Lame de scie à segment, Ø 65 mm, pour le plâtre
HB 8892-02	Lame de scie à segment, Ø 65 mm, x-bite
HB 8890-01	Lame de scie de taille, Ø 65 mm, pour le plâtre
HB 8890-02	Lame de scie de taille, Ø 65 mm, x-bite
HB 8893-01	Lame de scie de profondeur, Ø 70 mm, pour le plâtre
HB 8893-02	Lame de scie de profondeur, Ø 70 mm, x-bite

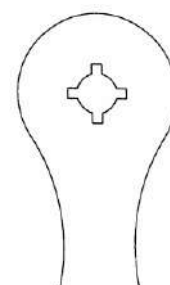

HB 8893-01/-02
Lame de scie de
profundidad

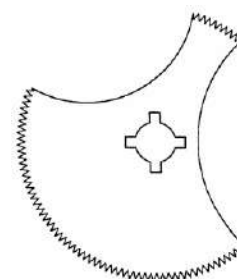

HB 8892-01/-02
Lame de scie à
segments Ø 65 mm

10 Pièce de rechange

E 8894-01	Clé plate
E 8894-02	Vis de maintien
E 8894-03	Bague de fixation
E 8891-01	Clé pour vis á six pans creux á poignée en T
E 8891-02	Vis á six pans creux pour tête de scie

khghk

11 Service

11.1 Tête de scie

Les positions se réfèrent à la figure 6.

Pos.	Pc.	Description	GOLD II Autopsie	
			50-60Hz / 220-240 V	50-60Hz / 110-120 V
			HB 8891	HB 8891V
10	1	Carter de la tête	E 8810-01GO	
20	1	Arbre principal / Bielle oscillante	E 8810-20/1	
30	1	Roulement coulissant avant	E 8810-12	
40	2	Vis à tête avec rondelle	E 8810-13	
50	1	Roulement coulissant arrière	E 8810-15/1	
60	1	des bagues de retenue	E 8810-20/2	
70	2	Vis de palier	E 8810-19	

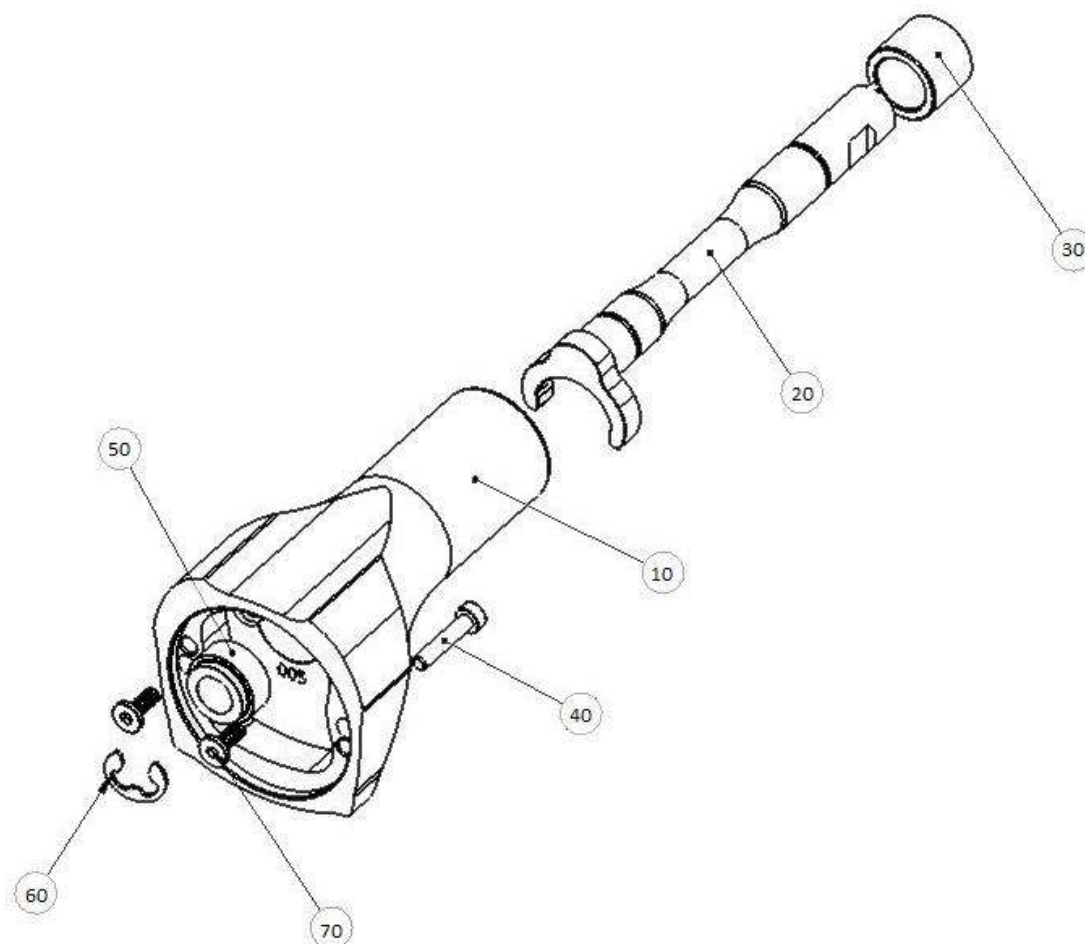


Fig. 6 :
Vue éclatée de la tête de scie

11.2 Moteur de la scie

Les positions se réfèrent aux fig. 7 à 9, page suivante.

Pos.	Pc.	Description	GOLD II Autopsie	
			50-60Hz / 220-240 V	50-60Hz / 110-120 V
			HB 8891	HB 8891V
10	1	Carter du moteur	E 8820-00SW	E 8820-00SW
20	1	Barre de contact	E 8820-01	E 8820-01
30	1	Coulisseau de contact	E 8820-02	E 8820-02
40	1	Empilage de tôles polaires avec bobine	E 8820-03	E 8820-04
50	2	Vis Ejot-Delta-PT	E 8820-05	E 8820-05
60	1	Bague déflectrice d'air	E 8820-06	E 8820-06
70	2	Porte-brosse	E 8820-07	E 8820-07
75	2	Connecteur	E 8820-08	E 8820-08
80	2	Balai de charbon	E 8820-09	E 8820-09
90	1	Ressort de contact	E 8820-10	E 8820-10
110	1	Système électronique	E 8820-11	E 8820-12
115	1	Fusible	E 8820-13	E 8820-14
116	1	Coussinet de pression pour le fusible	E 8820-15	E 8820-15
130	1	Borne de pontage	E 8820-16	E 8820-16
150	1	Couvercle	E 8820-17SW	E 8820-17SW
155	1	Coussinet de pression pour le couvercle	E 8820-18	E 8820-18
160	1	Vis Ejot-Delta-PT	E 8820-19	E 8820-19
170	5	Vis Ejot-Delta-PT	E 8820-20	E 8820-20
190	1	Tuyau de protection	E 8820-21	E 8820-21
250	1	Ancrage	E 8820-22	E 8820-23
260	1	Roulement à billes rainuré	E 8820-26	E 8820-26
270	1	Roulement à billes rainuré	E 8820-27	E 8820-27
300	1	Palier intermédiaire	E 8820-28	E 8820-28
310	1	Douille de palier	E 8820-29	E 8820-29
320	1	Roulement à billes rainuré	E 8820-32	E 8820-32
330	4	Vis Ejot-Delta-PT	E 8820-34	E 8820-34
340	1	Pointe cylindrique	E 8820-36	E 8820-36
180	1	Câble standard "Europe", 3 pôles	E 8825-01	-
180	1	Câble "Australia", 3 pôles	E 8825-03-A	-
180	1	Câble "USA", 2 pôles	-	E 8825-02-V
180	1	Câble "USA", 3 pôles	-	E 8825-04-W
180	1	Câble "UK", 3 pôles	E 8825-05-G	-
180	1	Câble "Switzerland", 2 pôles	E 8825-06-S	-
180	1	Câble „Aspiration“, 2 pôles	E 8825-07-C	-
180	1	Câble „Aspiration“, 2 pôles	-	E 8825-07-CV

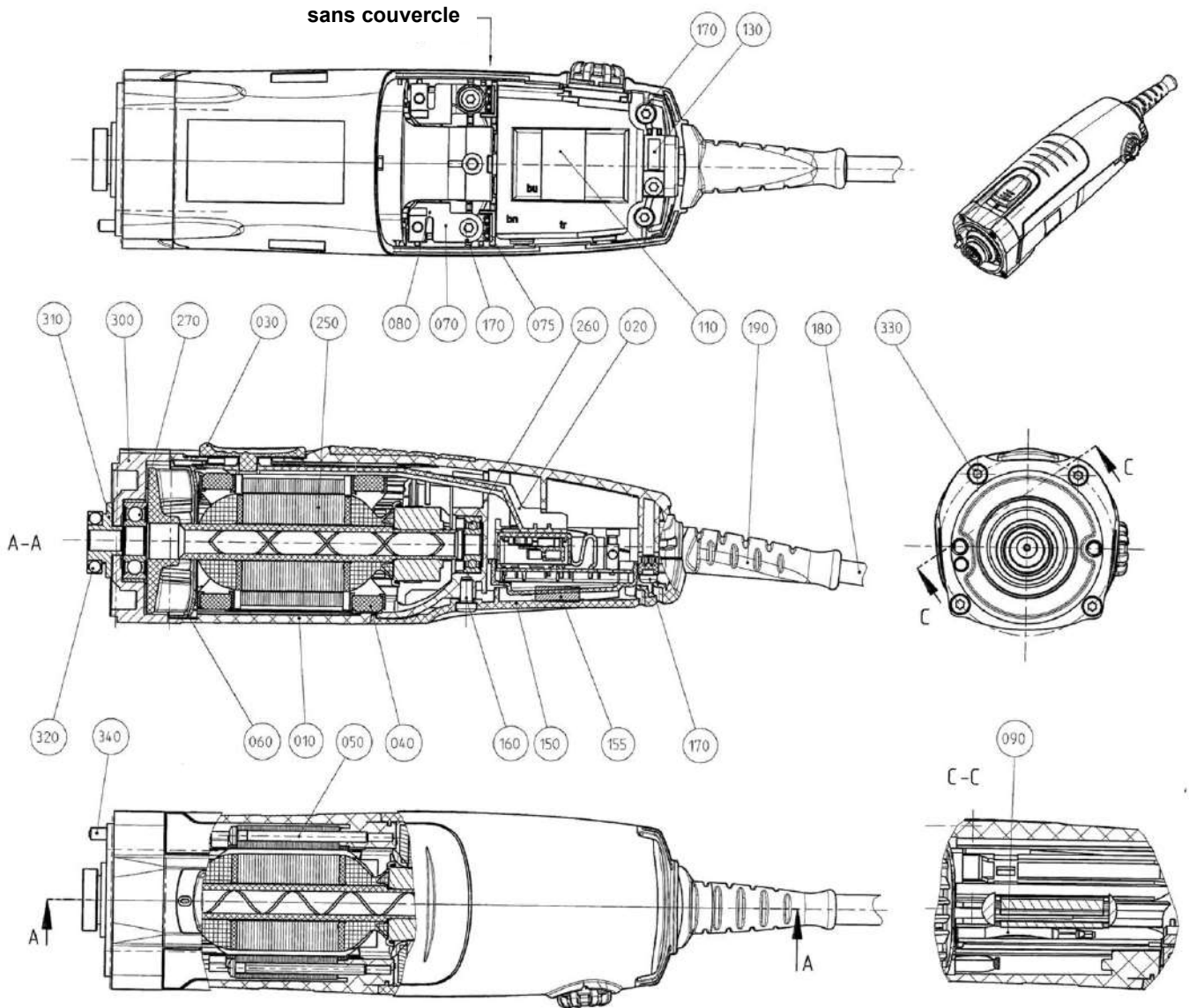


Fig. 7:
Plan du moteur

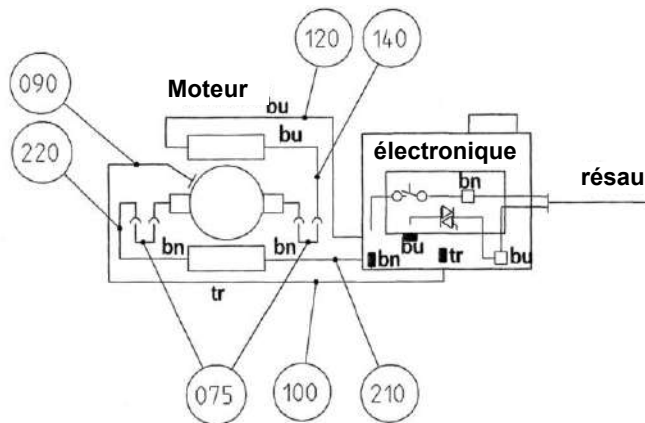


Fig. 8:
Schéma de connexion du moteur

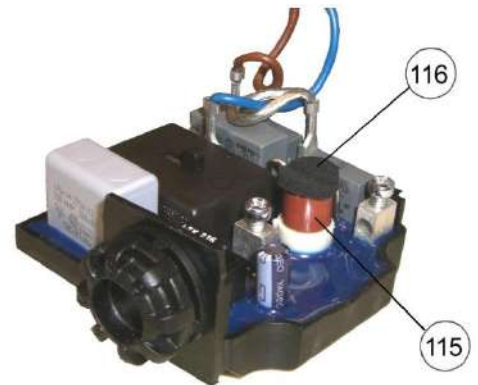


Fig. 9:
Système électronique

12 Garantie

Pour les scies à plâtres HEBU nous accordons une garantie conforme aux dispositions légales et spécifiques aux pays (preuve par la facture ou le bon de livraison). Le temps de garantie se porte sur 18 mois. Dans le cas de défauts de matériel ou de production, nous prenons en charge la réparation gratuite de l'appareil. L'exigence de garantie devient caduque si des tentatives de réparation ont été faites par vos propres soins.


Les dommages occasionnés par une manipulation non appropriée, une surcharge ou l'usure normale sont exclus de la garantie. Veuillez vous adresser à notre service clientèle.

Pour les cas de garantie et de réparation, veuillez joindre à l'appareil une copie de la facture ou du bon de livraison.



13 Protection de l'environnement

Veuillez remettre les emballages, les appareils usagés et les accessoires à un service de recyclage respectant l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères, mais ils doivent être apportés à un système local d'élimination et de recyclage pour les appareils électriques.

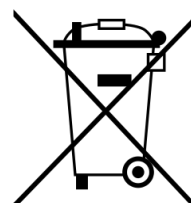Votre revendeur vous fournira d'autres informations.



14 Données techniques

Type	HB 8891 (A / G / S)	HB 8891 (B / V)
Raccordement électrique	220-240 Volt, 50/60 Hz.	110-120 Volt, 50/60 Hz.
Puissance nominale	250 Watt	250 Watt
Type de courant	1 ~	1 ~
Vitesse du moteur	ca. 12000 – 21000 min ⁻¹	ca. 12000 – 21000 min ⁻¹
Oscillation	200-350 oscillations / seconde	200-350 oscillations / seconde
Angle d'oscillation	6°	6°
Poids	1,3 kg	1,3 kg
Catégorie de protection	II 	II 
Protection (IP)	IP2X	
Niveau sonore (évalué A)	Typiquement 75 dB (A). Le niveau sonore en travaillant peut dépasser 85 dB (A). À partir de 85 dB (A) il faut porter une protection auditive !	
Vibration main-bras	Typiquement inférieure à 2,5 m/s ² . Les valeurs sont mesurées selon EN 50 144.	

15 Adresse du fabricant et du service après-vente

Si vous avez besoin de ce mode d'emploi en version papier, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous. Le mode d'emploi papier sera mis à votre disposition dans les sept jours calendaires suivant la réception de la demande.

Alternativement, vous pouvez imprimer vous-même la mode d'emploi électronique.



HEBUmedical GmbH
 Badstraße 8
 78532 Tuttlingen / Germany
 Tel. +49 7461 94 71 - 0
 eMail: service@HEBUmedical.de
 Web: www.HEBUmedical.de



HB 8891-A
HB 8891-B
HB 8891-G
HB 8891-S
HB 8891-V

Sierra oscilante para yeso

HEBU Sierra Oscillo GOLD II Autopsia







Indice

1	Explicaciones símbolos	49
2	Volumen de suministro	49
3	Instrucciones de seguridad	50
4	Campo de aplicación	50
4.1	Destinación.....	50
4.2	Contraindicaciones.....	51
5	Montar / Cambiar la hoja de sierra	51
5.1	Abrir el tornillo de sujeción / Retirar la hoja de la sierra	51
5.2	Colocar la nueva hoja de la sierra	52
6	Aplicación.....	52
6.1	Abrir vendajes duros	53
6.2	Para la autopsia	53
7	Limpieza y mantenimiento	54
7.1	El uso de la sierra para yeso:	54
7.2	El uso de la sierra para autopsia:	54
8	Esterilización	55
9	Accesorios	56
10	Pieza de repuesto	56
11	Servicio	57
11.1	Cabezal de la sierra	57
11.2	Motor de la sierra	58
12	Garantía	60
13	Protección del medio ambiente	60
14	Datos técnicos	60
15	Dirección del fabricante y del servicio posventa.....	60



HEBU
Sierra Oscillo
GOLD II
Autopsia

1 Explicaciones símbolos


Symbol	Definition
	Marcado CE
	Atención
	Fabricante
	Marcado WEEE
 /  Hinweis auf eIFU	Instrucciones de uso (electrónicas)











2 Volumen de suministro

HB 8891	Sierra oscilante GOLD II AUTOPSIE de HEBU
HB 8892-01	Hoja de sierra circular, Ø 65 mm, para material sintético
HB 8893-01	Hoja de sierra circular, Ø 70 mm, para material sintético
HB 8877	Tubo con grasa especial, 8g
E 8894-01	2 llaves de boca
E 8891-03	Torx llave con mango en T
	Instrucciones para el uso

3 Instrucciones de seguridad

Nuestros productos están destinados exclusivamente al uso profesional, de acuerdo con la finalidad prevista, por parte de personal especializado debidamente formado y cualificado, y solo pueden ser adquiridos por este.

Todas las instrucciones de seguridad que se encuentran en estas instrucciones de servicio están marcadas con el símbolo  .

	Este producto NO es un dispositivo médico según (UE) 2017/745.
	Antes del uso, lea estas instrucciones de servicio así como las disposiciones nacionales pertinentes relacionadas con la protección laboral y actúe en consecuencia. <i>Rogamos guarde estas instrucciones de servicio para su uso posterior y facilítelas también en caso de la transmisión o venta del aparato.</i>
	Utilización adecuada: Este aparato está destinado a abrir por serrado vendajes duros u autopsie.
	No fijar por remache ni atornillar carteles ni símbolos en el aparato. Esto puede hacer perder el efecto al aislamiento protector. Es recomendable utilizar carteles adhesivos.
	Utilizar exclusivamente clavijas de enchufe y cables en perfecto estado. Compruebe los cables y clavijas de enchufe regularmente.
	La tensión de alimentación ha de coincidir con las indicaciones sobre tensión que se encuentran en el aparato.
	Utilizar exclusivamente accesorios originales.
	Utilizar equipo de protección personal, gafas de protección, protección auditiva y guantes.
	No utilizar el aparato en zonas con peligro de explosión.
	Evite tirar los productos de forma inadecuada o dejarlos caer.

4 Campo de aplicación

Las sierras de auopsia oscilantes se utilizan principalmente en autopsias.

4.1 Destinación

Un producto sostenido a mano, accionado por corriente alterna (AC) para cortar yeso o material sintético, generalmente durante la remoción de un modelo de yeso. El extremo proximal (el mango) es usualmente cilíndrico, mientras que el extremo distal termina en una hoja redonda, semicircular o circular adecuada para cortar material de yeso. Las hojas corten porque un motor eléctrico en el mango las impulsa. El corte se hace por vibración en lugar de aserrar.

4.2 Contraindicaciones

No se conocen contraindicaciones

5 Montar / Cambiar la hoja de sierra



La conexión fortuita puede provocar heridas. Desenchufar la clavija de enchufe antes de efectuar el cambio. Utilice guantes estables al objeto de evitar heridas con la hoja de la sierra. Conectar a la red la sierra oscilante de HEBU exclusivamente cuando esté apagada.

5.1 Abrir el tornillo de sujeción / Retirar la hoja de la sierra

1. Coloque la sierra sobre una base estable (mesa).
2. Coloque una llave de boca en el árbol de accionamiento detrás de la hoja de la sierra y la segunda delante en el tornillo de sujeción (ver ilustración 1).
3. Sujete la llave posterior fijamente y utilícela para fijar la sierra.
4. Abra el tornillo de sujeción con la llave anterior.
5. Retire el tornillo de sujeción y el anillo de fijación. Cerciérese de que no se pierda ninguna pieza.
6. En caso necesario, retire la hoja usada de la sierra.



Ilustración 1:
Soltado del tornillo de sujeción

5.2 Colocar la nueva hoja de la sierra

1. Controle que la rosca interior y el alojamiento para la hoja de la sierra del árbol de accionamiento estén limpios.
2. Coloque la nueva hoja de la sierra.
No importa el lado de la sierra que quede hacia fuera o hacia dentro.

¡Importante!

Las entalladuras de la hoja de la sierra han de estar exactamente en los dos pivotes del árbol de accionamiento.

3. Coloque el anillo de fijación. Las entalladuras en el anillo de fijación han de mirar siempre hacia la sierra (ver ilustración 2). Estas entalladuras también han de encontrarse exactamente en los pivotes.
4. Gire manualmente el tornillo de sujeción y apriételo ligeramente.
5. Posteriormente, apriételo bien con ayuda de la llave de boca, tal y como se describe más arriba.
El par de apriete es de 6 – 7 Nm. ¡Atención! No pasar de rosca.



Ilustración 2:
Colocación de la hoja de la sierra

6 Aplicación

Encender y apagar (ver ilustración 3)

- Encender: Desplazar el interruptor hacia delante (1)
Apagar: Desplazar el interruptor hacia detrás (0)



Ilustración 3

Ajustar la frecuencia de oscilaciones (ver ilustración 3)

Seleccione la frecuencia de oscilaciones con el motor en marcha. La frecuencia de oscilaciones óptima puede ajustarse en el regulador de velocidades según las características del material de vendaje.

Preselección de la frecuencia de oscilaciones con el regulador de velocidades electrónico.

- Frecuencia de oscilaciones mínima (1)
Frecuencia de oscilaciones máxima (8)



Ilustración 4

6.1 Abrir vendajes duros

Para empezar, seleccione la hoja de sierra adecuada. Coloque la sierra oscilante de HEBU con su pertinente hoja de sierra sobre el vendaje y presione ligeramente. Durante esta operación, la mano guía puede utilizarse como apoyo y control de profundidad impidiendo la introducción abrupta cuando el vendaje ya se ha cortado totalmente.

Mientras la hoja de sierra corta el yeso se nota claramente una resistencia. Cuando el yeso se ha terminado de cortar, desaparece la resistencia. En el momento en que se nota que se ha terminado el corte, la hoja de la sierra se levanta ligeramente pero sin salir de la ranura de corte y se mueve hacia delante aprox. 15 mm en el sentido de corte.

A continuación se coloca nuevamente y se actúa como se ha descrito anteriormente hasta que se ha cortado totalmente el siguiente tramo.

De esta forma, el vendaje de yeso se abre de forma segura mediante una serie de cortes y movimientos lineales a lo largo de la línea de corte como si fuera un sólo corte continuo lineal.

Tras pocas aplicaciones, el usuario ya se ha acostumbrado a guiar la sierra por el vendaje de yeso y adquiere la sensibilidad para no presionar la hoja de la sierra en el momento en que se deja de notar la resistencia.

Indicaciones adicionales:

- Prácticamente todos los vendajes de yeso o de material sintético tienen características diferentes debido a las distintas propiedades de los materiales utilizados. Intente encontrar la velocidad óptima en cada caso durante el proceso de trabajo.
- En vendajes de material sintético es ventajoso trabajar a baja velocidad. De esta forma se evita que el material sintético empiece a fusionarse al cortarse debido al calor de fricción producido.
- No cortar la guía de metal del vendaje.
- Durante el aserrado, comprobar que el tornillo de sujeción esté bien asentado y, dado el caso, reapretarlo.
- Si se sobrecarga el motor, el aparato se apaga automáticamente. El fusible (ver ilustración 9 página 59, pos 115) se encuentra en la platina electrónica (ver ilustración 7 página 59, pos 110), el cual se puede cambiar en pocos pasos después de destornillar la carcasa.
- Las hojas de sierra desgastadas y romas provocan una carga elevada del motor, por lo que deberían controlarse regularmente y cambiarlas a tiempo.

Para conseguir un desgaste homogéneo de la hoja de la sierra, abrir el tornillo de sujeción y girar la hoja de la sierra 90°.

6.2 Para la autopsia

La sierra oscilante se usa en la autopsia para cortar y separar huesos. La guía está descrito en el capítulo 4.1.

En el campo de la patología se puede también abrir vendajes duros con la sierra de autopsia ,en caso necesario.

Atende las informaciones adicionales!

7 Limpieza y mantenimiento



La conexión fortuita puede provocar heridas. Desenchufar la clavija de enchufe antes de realizar trabajos de limpieza y mantenimiento.



Ilustración 5

Realizar las medidas indicadas a continuación una vez a la semana, pero si se usa mucho la sierra, realizarlas con mayor frecuencia:

Limpiar las aberturas de entrada de aire refrigerante para garantizar suficiente paso de aire para la refrigeración del motor. Soplar el compartimiento del motor desde fuera con aire comprimido seco.

Una desinfección frotada es adecuada para carcasas de motores, cables, enchufes y todos los accesorios, como hojas de sierra y llaves de horquilla. Recomendamos productos con un valor de pH entre 9 y 10, por ejemplo, MediClean forte de Dr. Weigert.

Asegúrese de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica y de que el líquido desinfectante no penetre en el motor.

7.1 El uso de la sierra para yeso:

Realizar las medidas indicadas a continuación una vez a la semana, pero si se usa mucho la sierra, realizarlas con mayor frecuencia: Limpiar las aberturas de entrada de aire refrigerante (ver ilustración 5) para garantizar suficiente paso de aire para la refrigeración del motor. Soplar el compartimiento del motor desde fuera con aire comprimido seco.

7.2 El uso de la sierra para autopsia:

Después de cada uso debe limpiarla.

Una limpia cuidadosa se puede efectuar solamente en condición desmontada de la hoja de sierra (compara punto 3.1 Abrir el tornillo de sujeción / Retirar la hoja de la sierra). Remueve y gira los dos tornillos de cabeza.

Descuelge el tornillo hexagon, la anilla de seguridad y la hoja de sierra. Saca la cabeza de la sierra (compara figura 10)



Ilustración 10



En caso afirmativo utiliza guantes estables para evitar heridas al cortar con la hoja de sierra.

Para la limpieza mecánica se tiene que meterlo en una posición horizontal (compara figura 11) La limpia mecánica se debe efectuar con un programa de limpia estándar. El producto de limpieza tiene que tener un valor de pH de <10, si no el recubrimiento de la superficie puede deteriorar. Usa cepillos plásticos y/o pistolas de limpia para la limpia manual. No usa productos de limpieza con efectos fijadores.



Ilustración 11

El valor de pH tiene que ser 10, para que el recubrimiento de la

superficie no se estropee. Limpia la cabeza de la sierra con agua completamente desalinizada. Después utiliza desinfectante.



Solamente la cabeza de la sierra debe ser preparada y esterilizada. El motor eléctrico no.

Además limpia las aberturas de entrada de aire refrigerante (ver figura 5) para garantizar un paso de aire suficiente para la refrigeración del motor. Sopla el compartimento del motor de fuera con aire comprimido y seco. Después de la esterilización se efectúa el montaje.

8 Esterilización

Se esteriliza solo la cabeza de la sierra en el vapor ;

El motor de eléctrico no se debe esterilizar y tampoco no se debe entrar en contacto con agua respectivamente con otros líquidos así como cuyos vapors.

Desmontaje: Descolgar tornillo hexagon, anilla de seguy hoja de sierra. Desatar los dos tornillos con llave allen y apagarlos completamente.

Retire el cabezal de la sierra (pieza de engranaje) y esterilícelo en autoclave como se indica a continuación:

Antes de la esterilización, cabezal de la sierra debe someterse a una limpieza y desinfección, enjuagarse sin residuos utilizando agua desmineralizada y secas de manera subsuficiente.

HEBUmedical recomienda utilizar un proceso validado de esterilización de vapor (por ejemplo, esterilizador de conformidad con EN 285 y validado de acuerdo con DIN EN ISO 17665-1).

Al usar el método de vacío fraccionado, la **esterilización** debe realizarse con al menos **134°C (EE. UU. 132°C)** con un **período de permanencia mínimo de 3 minutos**. El secado al vacío debe llevarse a cabo por al menos 20 minutos.


Montaje: Se efectúa en orden inverso. Se tiene cuidar que se engrasa los alas delante de la instalación con 1ml con el graso HB 8877. Además se tiene que atornillar los tornillos con 6Nm.




Atención: El montaje de la cabeza de sierra al motor se efectúa a través de pulsar con movimientos suaves de una dirección a la otra hasta la biela oscilante se encajó con sus bocas fuera del rodamiento ranurado de bolas.

9 Accesorios

HB 8899-01	Maletín sintético con pieza insertada
HB 8878-01	Tornillo patentado
HB 8889-01	Juego de reequipamiento (aspirador, manguera, campana de aspiración, herramientas), 220-240V
HB 8889-01	Juego de reequipamiento (aspirador, manguera, campana de aspiración, herramientas), 100-120V
HB 8895-03	Hoja de sierra circular TITANIUM, Ø 50 mm
HB 8896-03	Hoja de sierra circular TITANIUM, Ø 65 mm
HB 8895-04	Hoja de sierra circular "non-stick", Ø 50 mm
HB 8896-04	Hoja de sierra circular "non-stick", Ø 65 mm
HB 8897-02	Hoja de sierra circular, Ø 44 mm, x-bite
HB 8897-01	Hoja de sierra circular, Ø 44 mm, para yeso
HB 8895-02	Hoja de sierra circular, Ø 50 mm, x-bite
HB 8895-01	Hoja de sierra circular, Ø 50 mm, para yeso
HB 8896-02	Hoja de sierra circular, Ø 65 mm, x-bite
HB 8896-01	Hoja de sierra circular, Ø 65 mm, para yeso
HB 8898-01	Hoja de sierra circular, Ø 80 mm, x-bite
HB 8898-02	Hoja de sierra circular, Ø 80 mm, para yeso
HB 8890-02	Hoja de sierra entallada, Ø 65 mm, x-bite
HB 8890-01	Hoja de sierra entallada, Ø 65 mm, para yeso
HB 8893-02	Hoja de sierra para profundidades, Ø 70 mm, x-bite
HB 8893-01	Hoja de sierra para profundidades, Ø 70 mm, para yeso
HB 8892-02	Hoja de sierra segmentada, Ø 65 mm, x-bite
HB 8892-01	Hoja de sierra segmentada, Ø 65 mm, para yeso

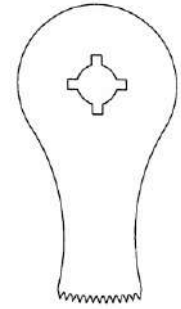

HB 8892-01/-02
Hoja de sierra para segmento, Ø 65 mm

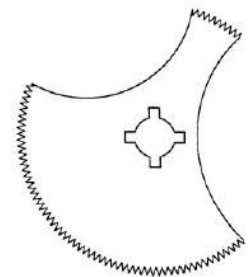

HB 8893-01/-02
Hoja de sierra de profundidad

10 Pieza de repuesto

E 8894-01	Llave de boca
E 8894-02	Tornillo de sujeción
E 8894-03	Anillo de fijación
E 8891-01	Llave de macho hexagonal con mango
E 8891-02	Tornillos de macho hexagonal para cabeza de sierra

11 Servicio

11.1 Cabezal de la sierra

Las posiciones del dibujo se refieren a la ilustración 6

Pos.	Pz.	Descripción	GOLD II Autopsie	
			50-60Hz / 220-240 V	50-60Hz / 110-120 V
			HB 8891	HB 8891V
10	1	Carcasa del cabezal	E 8810-01GO	
20	1	Árbol principal / Biela oscilante de boca	E 8810-20/1	
30	1	Cojinete de deslizamiento al frente	E 8810-12	
40	2	Tornillo de ajuste con arandela	E 8810-13	
50	1	Cojinete de deslizamiento detrás	E 8810-15/1	
60	1	anillos de retención	E 8810-20/2	
70	2	Tornillo del rodamiento	E 8810-19	

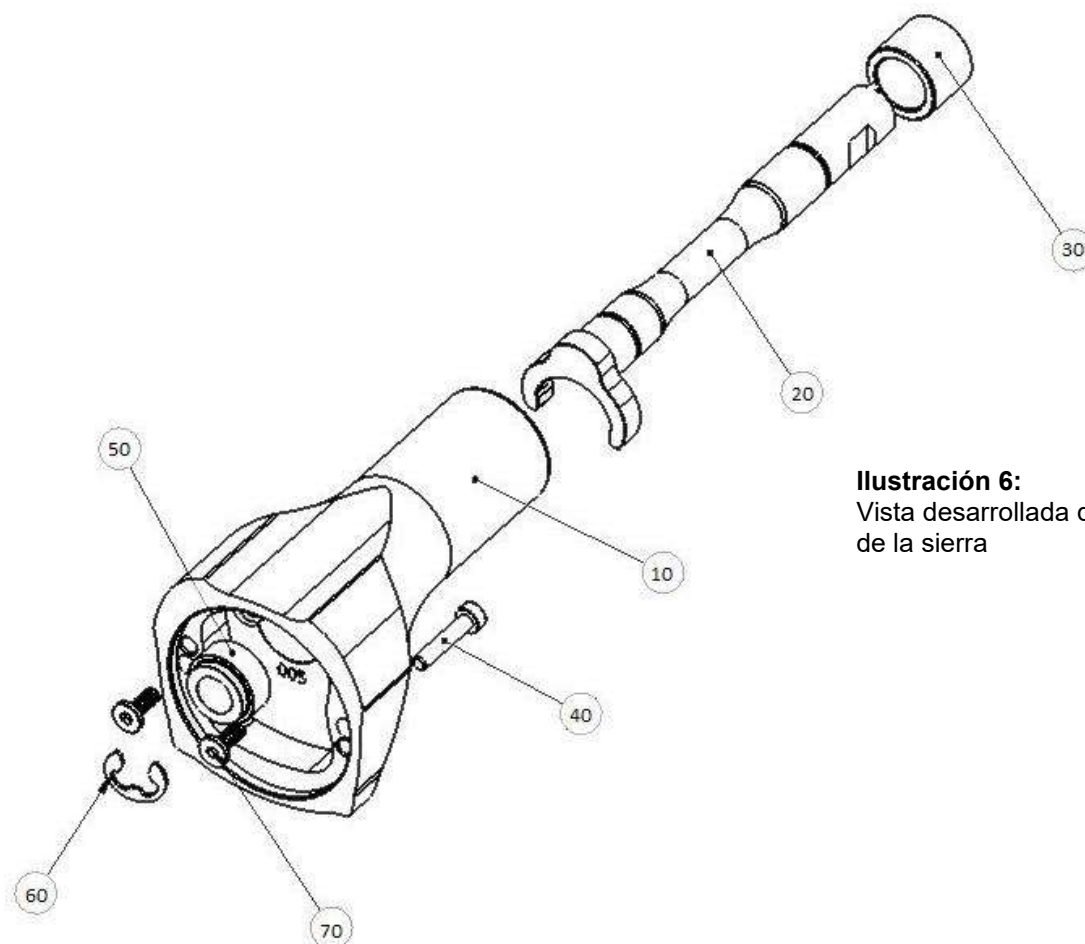


Ilustración 6:
Vista desarrollada del cabezal de la sierra

11.2 Motor de la sierra

Las posiciones del dibujo se refieren a la ilustración 7 a 9, página siguiente.

Pos.	Pz.	Descripción	GOLD II Autopsie	
			50-60Hz / 220-240 V	50-60Hz / 110-120 V
			HB 8891	HB 8891V
10	1	Carcasa del motor	E 8820-00SW	E 8820-00SW
20	1	Vástago de transmisión	E 8820-01	E 8820-01
30	1	Activador del interruptor	E 8820-02	E 8820-02
40	1	Paquete de chapas para polos con bobina	E 8820-03	E 8820-04
50	2	Tornillo Ejot-Delta-PT	E 8820-05	E 8820-05
60	1	Anillo director de aire	E 8820-06	E 8820-06
70	2	Soporte de escobillas	E 8820-07	E 8820-07
75	2	Acoplamiento de enchufe	E 8820-08	E 8820-08
80	2	Escobilla de carbón	E 8820-09	E 8820-09
90	1	Resorte de contacto	E 8820-10	E 8820-10
110	1	Electrónica	E 8820-11	E 8820-12
115	1	Fusible	E 8820-13	E 8820-14
116	1	Acolchado resistente a la presión para fusible	E 8820-15	E 8820-15
130	1	Puente de sujeción de cables	E 8820-16	E 8820-16
150	1	Tapa	E 8820-17SW	E 8820-17SW
155	1	Acolchado resistente a la presión para tapa	E 8820-18	E 8820-18
160	1	Tornillo Ejot-Delta-PT	E 8820-19	E 8820-19
170	5	Tornillo Ejot-Delta-PT	E 8820-20	E 8820-20
190	1	Tubo flexible aislante	E 8820-21	E 8820-21
250	1	Rotor	E 8820-22	E 8820-23
260	1	Rodamiento ranurado de bolas	E 8820-26	E 8820-26
270	1	Rodamiento ranurado de bolas	E 8820-27	E 8820-27
300	1	Rodamiento intermedio	E 8820-28	E 8820-28
310	1	Casquillo del rodamiento	E 8820-29	E 8820-29
320	1	Rodamiento ranurado de bolas	E 8820-32	E 8820-32
330	4	Tornillo Ejot-Delta-PT	E 8820-34	E 8820-34
340	1	Pasador cilíndrico	E 8820-36	E 8820-36
180	1	Cable estándar "Europe", 3 polos	E 8825-01	-
180	1	Cable "USA", 2 polos	-	E 8825-02-V
180	1	Cable "Australia", 3 polos	E 8825-03-A	-
180	1	Cable "USA", 3 polos	-	E 8825-04-W
180	1	Cable "UK", 3 polos	E 8825-05-G	-
180	1	Cable "Switzerland", 2 polos	E 8825-06-S	-
180	1	Cable „Aspiracion“, 2 polos	E 8825-07-C	-
180	1	Cable „Aspiracion“, 2 polos	-	E 8825-07-CV

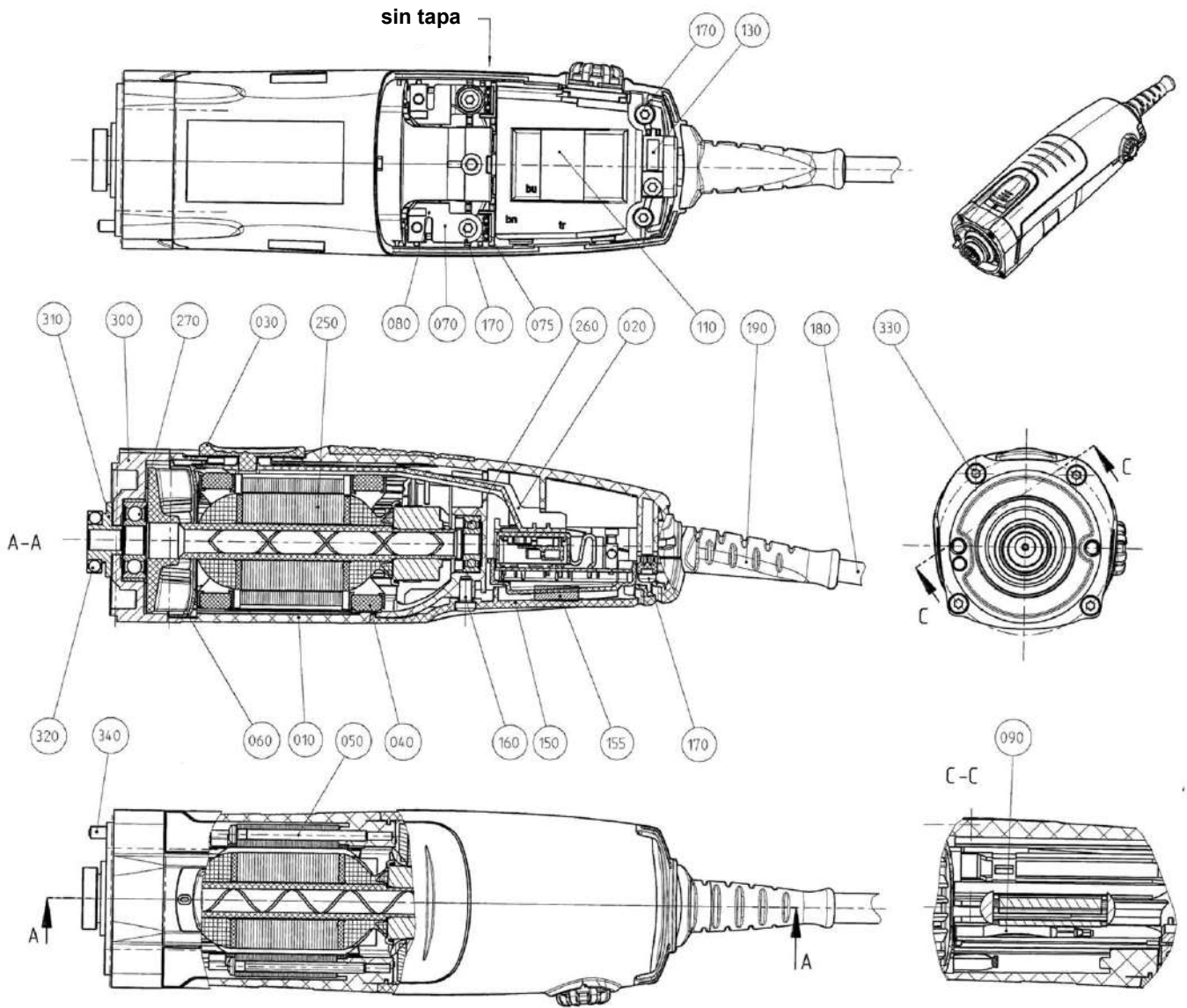


Ilustración 7:
Dibujo del motor

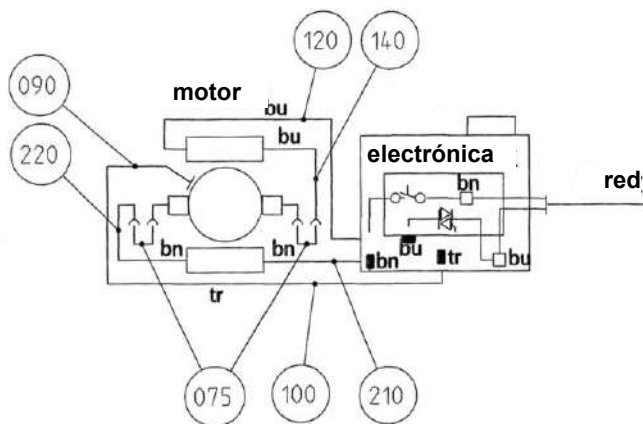


Ilustración 8:
Dibujo del motor

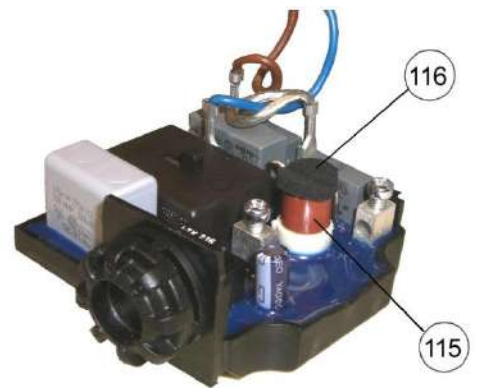


Ilustración 9:
Electrónica

12 Garantía

Para las sierras para yeso de HEBU prestamos garantía según las disposiciones legales y específicas de cada país (justificante por factura o albarán). La garantía asciende a 18 meses. En caso de fallos en el material o de producción reparamos el aparato gratuitamente. El derecho a garantía desaparece en caso de que se haya intentado reparar el aparato por cuenta propia. Quedan excluidos de la garantía los daños producidos por el trato inadecuado, sobrecarga o por el uso normal. Rogamos se dirija a nuestro Departamento de Servicio Posventa. En casos de garantía y reparación, rogamos adjunte al aparato una copia de la factura o del albarán.

13 Protección del medio ambiente

Entregue los embalajes de aparatos viejos y accesorios para el reciclaje ecológico. Los aparatos eléctricos no pueden eliminarse en la basura doméstica, éstos se han de entregar al sistema local de eliminación y reciclaje para aparatos eléctricos.

Su comerciante especializado le facilitará más información al respecto.



14 Datos técnicos

Tipo constructivo	HB 8891 (A / G / S)	HB 8891 (B / V)
Conexión a la red	220-240 Volt, 50/60 Hz.	110-120 Volt, 50/60 Hz.
Toma de corriente nominal	250 Watt	250 Watt
Tipo de corriente	1 ~	1 ~
Velocidad del motor	ca. 12000 – 21000 min ⁻¹	ca. 12000 – 21000 min ⁻¹
Oscilaciones	200-350 oscilación / segundo	200-350 oscilación / segundo
Ángulo de oscilación	6°	6°
Peso	1,3 kg	1,3 kg
Clase de protección	II <input type="checkbox"/>	II <input type="checkbox"/>
Protección (IP)	IP2X	
Nivel de ruido (valoración A)	normalmente 75 dB (A). El nivel de ruido durante el trabajo puede sobrepasar los 85 dB (A). ¡A partir de 85 dB (A), llevar protección acústica!	
Vibración en el brazo y la mano	Normalmente inferior a 2,5 m/s ² . Valores de medición recogidos según la EN 50 144.	

15 Dirección del fabricante y del servicio posventa

Si necesita este manual de instrucciones en papel, utilice los datos de contacto que se indican a continuación.

Las instrucciones de uso en papel se le facilitarán en un plazo de siete días después de la recepción de la solicitud.

Como alternativa, se puede imprimir el manual de instrucciones electrónico también por sí mismo.



HEBUMedical GmbH
Badstraße 8
78532 Tuttlingen / Germany
Tel. +49 7461 94 71 - 0
eMail: service@HEBUMedical.de
Web: www.HEBUMedical.de



HB 8891-A
HB 8891-B
HB 8891-G
HB 8891-S
HB 8891-V

Sega de gesso oscillante

HEBU Sega oscillante GOLD II Autopsia






Contenuto

1	Spiegazioni die simboli	63
2	Dotazione di base	63
3	Indicazioni di sicurezza	64
4	Campo di applicazione	64
4.1	Destinazione	64
4.2	Controindicazioni.....	65
5	Montaggio/sostituzione delle lame.....	65
5.1	Apertura di vite di fissaggio / rimozione lame	65
5.2	Montare una nuova lama	66
6	Funzionamento	66
6.1	Taglio di gessi tradizionali o sintetici	67
6.2	Per la autopsia	67
7	Pulizia e manutenzione.....	68
7.1	Uso come sega da gesso:.....	68
7.2	Uso come sega autopsia:.....	68
8	Sterilizzazione	69
9	Accessori	70
10	Ricambi	70
11	Service	71
11.1	Gruppo sega	71
11.2	Gruppo motore	72
12	Garanzia	74
13	Smaltimento	74
14	Specifiche tecniche	74
15	Dati del fabbricante e servizio assistenza	74



HEBU
Sega
oscillante
GOLD II
Autopsia

1 Spiegazioni die simboli


Symbol	Definition
	Marchatura CE
	Attenzione
	Fabbricante
	Marchatura WEEE
 Hinweis auf eIFU	Istruzioni per l'uso (elettroniche)

2 Dotazione di base

HB 8871	HEBU sega oscillante GOLD II ACCU AUTOPSIA
HB 8877	Grasso lubrificante, 8 gr.
E 8891-03	Chiave esagonale con manico a T
HB 8892-01	Lama sagittale Ø 65 mm per gesso
HB 8893-01	Lama sagomata Ø 70 mm. Per gesso
E 8894-03	2x Chiave fissa
	Manuale istruzioni

3 Indicazioni di sicurezza

I nostri prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale da parte di personale specializzato adeguatamente formato e qualificato, in conformità con la loro destinazione d'uso, e possono essere acquistati solo da tale personale.

Tutte le indicazioni di sicurezza sono contrassegnate con il simbolo  .



Questo prodotto NON è un dispositivo medico secondo (UE) 2017/745.



Leggere queste istruzioni per l'uso e le normative nazionali in materia di salute e sicurezza prima dell'uso e agire di conseguenza.

Si prega di conservare queste istruzioni per l'uso per un uso successivo e includerle con il dispositivo se lo si trasmette o lo si vende.



Destinazione d'uso: taglio di gessi tradizionali e sintetici.



Non avvitare né rivettare nulla sull'apparecchio. Questo potrebbe danneggiare l'isolamento del dispositivo. E' preferibile utilizzare adesivi.



**Utilizzare solamente cavi e prese integri.
Controllare periodicamente cavi e spine.**



Il voltaggio di targa deve corrispondere al voltaggio della rete di alimentazione.



Utilizzare solamente accessori originali HEBU.



Indossare dispositivi di protezione adeguati: occhiali di protezione e guanti.



Non si deve usare questo dispositivo in zone dove esista rischio di esplosione.



Evitare di gettare o far cadere i prodotti in modo improprio.

4 Campo di applicazione

Le seghe oscillanti per autopsia utilizzate principalmente nelle autopsie.

4.1 Destinazione

Prodotto manuale, a corrente alternata (AC) per il taglio di gesso o materiale sintetico, di solito durante la rimozione di un getto di gesso. L'estremità prossimale (impugnatura) è di solito cilindrica, mentre l'estremità distale termina con una lama circolare, a mezzaluna o circolare adatta per tagliare materiale di gesso. Le lame tagliano perché un motore elettrico nell'impugnatura le fa oscillare. Il taglio viene effettuato vibrando piuttosto che tagliando.

4.2 Controindicazioni

Non sono note controindicazioni.

5 Montaggio/sostituzione delle lame



Scollegare dalla presa di corrente prima di effettuare la sostituzione o rimozione delle lame. Se necessario, utilizzare guanti di protezione.

COLLEGARE LA SEGA ALLA PRESA DI CORRENTE SOLAMENTE A MOTORE SPENTO

5.1 Apertura di vite di fissaggio / rimozione lame

1. Appoggiare la sega su una superficie stabile (tavolo).
2. Posizionare una delle chiavi in dotazione fra la lama e il corpo della sega e l'altra chiave sul dado di bloccaggio della lama. (Vedi figura 1)
3. Tenere ferma la lama con la prima chiave.



4. Allentare il dado di bloccaggio con la seconda chiave.
5. Togliere il dado di bloccaggio e l'anello di tenuta, facendo attenzione a non smarrire nessun pezzo.
6. Smontare la lama.

5.2 Montare una nuova lama

1. Controllare la pulizia della filettatura e del dado di bloccaggio della lama.
2. Montare una nuova lama. Non è importante quale faccia della lama sia rivolta verso l'alto.

Importante !

Gli incavi della lama devono combaciare con le tacche del perno centrale del motore.

3. Montare il dado di bloccaggio. Gli incavi dell'anello di tenuta devono sempre essere rivolti verso la lama. (Vedi figura 2) e devono combaciare esattamente con le tacche del perno centrale.
4. Stringere leggermente a mano il dado di bloccaggio.
5. Stringere il dado con la chiave in dotazione, fino al completo serraggio.



Figura 2

6 Funzionamento

Accensione e spegnimento (Figura 3)

- Per accendere: Spingere l'interuttore in avanti (1)
Per spegnere: Spingere l'interuttore all'indietro (0)



Figura 3

Regolare le frequenza delle oscillazioni (Figura 4)

Selezionare la frequenza quando la sega è avviata. La frequenza ottimale si può ottenere ruotando il pomello della regolazione della velocità in base alle caratteristiche dell'ingessatura.

La frequenza di oscillazione preimpostata è controllata da un dispositivo elettronico.

- Frequenza vibrante minore (1)
Frequenza vibrante maggiore (8)



Figura 4

6.1 Taglio di gessi tradizionali o sintetici

Scegliere accuratamente la lama da utilizzare.

Appoggiare la lama sul gesso da tagliare e premere delicatamente. Il movimento della sega va controllato con entrambe le mani.

Non appena la resistenza al taglio diminuisce, significa che il gesso è stato tagliato. Spostare quindi la lama in avanti, senza estrarla dal solco, per non perdere la direzione del taglio.

In questo modo il gesso viene tagliato per tutta la sua lunghezza in assoluta sicurezza.

In seguito a ciò imposta da nuovo e precede nell stesso modo.

Già dopo poche applicazione insorge abito.

Informazioni aggiuntive:

- Non utilizzare la sega da gessi quando il gesso aderisce direttamente all'epidermide, cioè se è stato fatto senza protezione con ovatta tedescha. Non usare per il taglio di metalli.
- Con l'uso si verranno a conoscere le caratteristiche dei diversi tipi di gesso quindi provare a regolare la velocità della sega in modo corretto durante il lavoro in base a essi.
- E' consigliabile utilizzare una velocità più bassa per gessi sintetici. Questo eviterà che la plastica in essi contenuta si fonda durante il taglio
- Controlla durante il segare il alloggiamento della vite di fissaggio e stringerla eventualmente
- Al sovraccaricare dell'apparecchio il motore si spegne automaticamente. Il fusibile si trova sulla piastrina elettronica. Dopo l'avvitare si può cambiare facilmente.
- L'uso di lame poco affilate può causare il deterioramento del motore e devono essere controllate e sostituite in tempo.

Per garantire un'usura uniforme delle lame, ruotarle di 90° di tanto in tanto, allentando il dado di bloccaggio

6.2 Per la autopsia

La sega oscillante si usa nella autopsia per tagliare ossi e per dividere. La direzione si della sega effettua come descritto in 4.1.

Nell'uso patologico si può anche aprire bendaggi dure con la sega per l'autopsia ,se necessario. Osserva le indicazione aggiuntive!

7 Pulizia e manutenzione



L' accensione accidentale della sega può provocare lesioni. Scollega la spina prima delle operazioni di manutenzioni.



Figura 5

In caso di uso frequente seguire le seguenti istruzioni almeno una volta alla settimana.

Mantenere libere le aperture di raffreddamento del motore. Soffiare aria compressa nell'alloggiamento del motore.

La disinfezione con strofinaccio è adatta per alloggiamenti motore, cavi, spine di rete e tutti gli accessori come lame da sega e chiavi a forcella. Consigliamo prodotti con un valore pH compreso tra 9 e 10, ad esempio MediClean forte del Dr. Weigert.

Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica e che il liquido disinfettante non penetri all'interno del motore.

7.1 Uso come sega da gesso:

In caso di uso frequente le seguenti istruzioni almeno una volta per settimana. Mantenere libere le aperture di raffreddamento del motore (vedi figura 5). Soffiare aria compressa nell'alloggiamento del motore.

7.2 Uso come sega autopsia:

Dopo di ogni uso si deve pulire la sega. Una pulitura si può fare solamente con la lama smontata(compara 3.1 Apertura di vite di fissaggio/rimozione lame).

Per questo si deve svitare le due vite di testa e girale completamente. Vite a testa esagonale, anello di fissaggio e lama di sega si deve smontare. La testa di sega (pezzo di rotismo) si deve togliere (fig.10)



Figura 10



!Attenzione! Pericolo di lesione. Usa eventualmente guanti stabili, per evitare ferite con la lame di sega.

Per la pulitura meccanica si deve posare la testa di sega in una posizione orizzontale (cf. fig. 11) . La purificazione meccanica si deve effettuare con un programma di pulitura standard. Il detergente deve possedere un valore del pH di <10, altrimenti si deteriora il rivestimento di superficie.



Figura 11

Per la pulitura manuale si deve usare come al solito, spazzole plastificate e/o pistole di purificazione. Non si deve usare detergenti con un effetto fissato. Il valore del pH deve essere <10 per evitare un danneggiamento della superficie. Lava la testa di sega con acqua desalinizzata. Adiacente usa disinfettante.



Si deve solamente sterilizzare la testa di sega, no il motore elettrico.

Ancora si deve pulire le aperture di aria fresca (vedi fig. 5) per garantire una permeabilità all'aria per il raffreddamento del motore. Per questo soffiare aria compressa nell'alloggiamento del motore. Non prima della sterilizzazione si effettua il montaggio.

8 Sterilizzazione

Autoclavare solamente la testa della sega (con cuscinetti)!

Non è possibile autoclavare il motore elettrico, che non deve ASSOLUTAMENTE entrare in contatto con acqua, liquidi o vapore acqueo.

Smontaggio:

Rimuovere le viti di fissaggio, l'anello e la lama.

Allentare le due viti a brugola e svitarle completamente. Rimuovere la testa della sega (parte ingranaggi) e metterla in autoclave come segue:

Prima della sterilizzazione la testa della sega deve essere sottoposti a pulizia e disinfezione, essere sciacquati senza residui usando acqua demineralizzata e essiccati qui. HEBUmedical consiglia di utilizzare un processo di sterilizzazione del vapore validato (ad es. Sterilizzatore in conformità con EN 285 e convalidata in conformità con Din EN ISO 17665-1).

Usando il metodo del vuoto frazionato, la **sterilizzazione** deve essere eseguita con almeno **134°C (USA 132°C)** con un **periodo di dimora minimo di 3 minuti**. L'asciugatura a vuoto deve essere effettuata mediante almeno 20 minuti.

Montaggio:

Procedere all'inverso rispetto alle operazioni di smontaggio.

Fa attenzione a lubrificare bene la forcella prima del montaggio con un 1ml di grasso HB 8877.


In più si deve avvitare le vite con 6Nm.




Attenzione: L'appunto della testa di sega al motore succede per premere con movimenti leggeri da avanti e indietro fino la forcella è ingranato con i suoi due parti fuori del cuscinetto

9 Accessori

HB 8899-01	Valigetta di trasporto
HB 8878-01	Vite brevetto
HB 8889-01	Sistema raccolta polveri (aspira polvere, tubo, cuffia), 220-240V
HB 8889-01V	Sistema raccolta polveri (aspira polvere, tubo, cuffia), 100-120V
HB 8895-03	Lama circolare Ø 50 mm TITANIO
HB 8896-03	Lama circolare Ø 65 mm TITAMIO
HB 8895-04	Lama circolare "non-stick", Ø 50 mm
HB 8896-04	Lama circolare "non-stick", Ø 50 mm
HB 8897-01	Lama circolare Ø 44 mm per gesso
HB 8897-02	Lama circolare Ø 44 mm. x-bite
HB 8895-01	Lama circolare Ø 50mm per gesso
HB 8895-02	Lama circolare Ø 50 mm x-bite
HB 8896-01	Lama circolare Ø 65 mm per gesso
HB 8898-01	Lama circolare Ø 80 mm x-bite
HB 8898-02	Lama circolare Ø 85 mm per gesso
HB 8896-02	Lama allungata Ø 65 mm x-bite
HB 8892-01	Lama sagittale Ø 65 mm per gesso
HB 8892-02	Lama sagittale Ø 65 mm. x-bite
HB 8890-01	Lama sagittale Ø 65 mm. per gesso
HB 8890-02	Lama sagittale Ø 65 mm. x-bite
HB 8893-01	Lama sagomata Ø 70 mm. per gesso
HB 8893-02	Lama sagomata Ø 70 mm x-bite

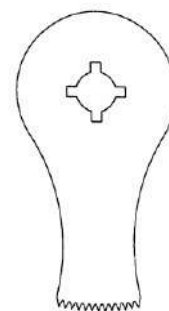

HB 8893-01/-02
Tiefensägeblatt

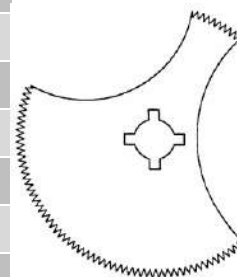

HB 8892-01/-02
Autopsiesägenblatt,
Segment Ø 65 mm

10 Ricambi

E 8894-01	Chiave aperta
E 8894-02	Dado di bloccaggio
E 8894-03	Anello di tenuta
E 8891-01	brugola con manico a T
E 8891-02	Coppia viti con rondella per fissaggio sega

11 Service

11.1 Gruppo sega

(Per l'esploso riferirsi alla fig. 6)

Pos.	Pezzo	Descrizione	GOLD II Autopsie	
			50-60Hz / 220-240 V	50-60Hz / 110-120 V
			HB 8891	HB 8891V
10	1	Corpo sega nero	E 8810-01GO	
20	1	Albero principale / Forcella	E 8810-20/1	
30	1	Cuscinetto a rullini	E 8810-11	
40	2	Vite fissaggio con rondella	E 8810-13	
50	1	Cuscinetto	E 8810-15/1	
60	1	anelli di tenuta	E 8810-20/2	
70	2	Viti cuscinetto	E 8810-19	

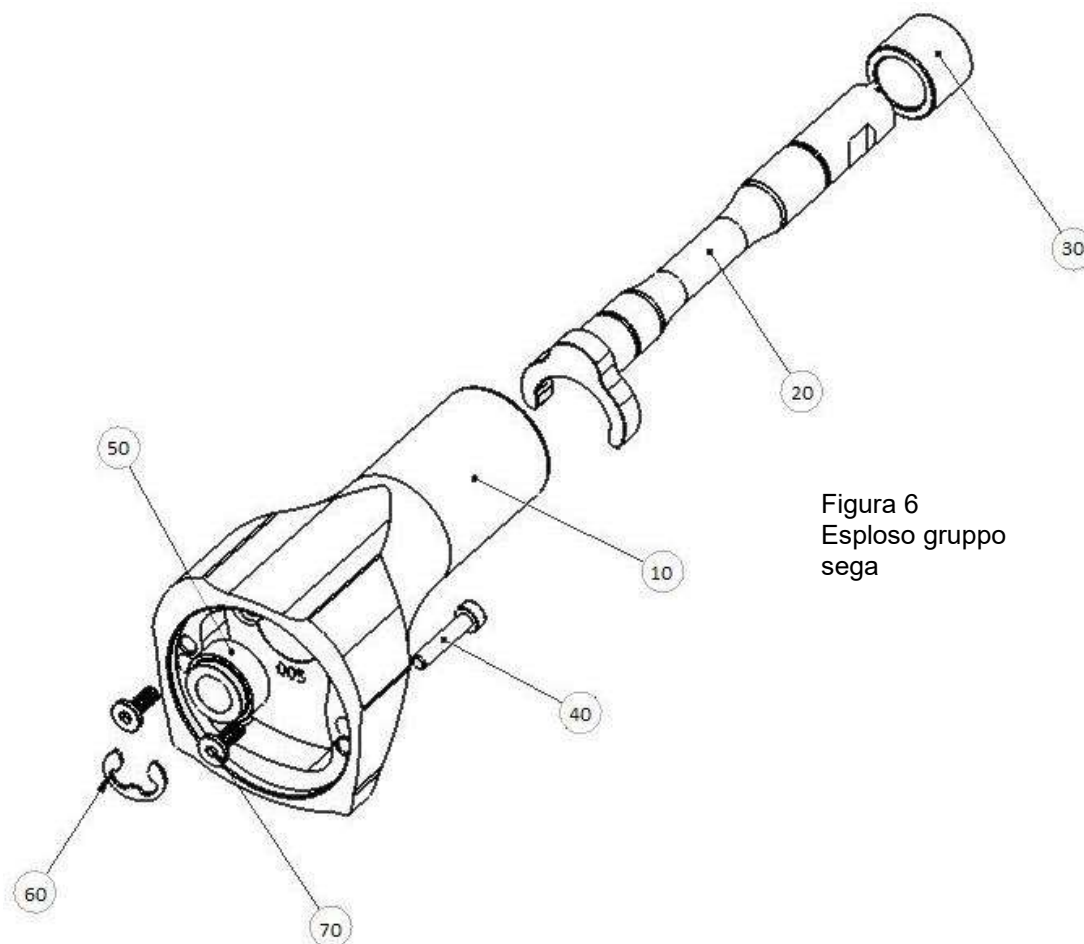


Figura 6
Esploso gruppo sega

11.2 Gruppo motore

Per gli esplosi fare riferimento alle figura della pagina seguente

Pos.	Pz.	Descrizione	GOLD II Autopsia	
			50-60Hz / 220-240 V	50-60Hz / 110-120 V
			HB 8891	HB 8891V
10	1	Involucro motore (NERO)	E 8820-00SW	E 8820-00SW
20	1	Barretta interruttore	E 8820-01	E 8820-01
30	1	Slitta comando interruttore	E 8820-02	E 8820-02
40	1	Statore completo di avvolgimento	E 8820-03	E 8820-04
50	2	Viti di fissaggio	E 8820-05	E 8820-05
60	1	Ventola	E 8820-06	E 8820-06
70	2	Porta spazzole	E 8820-07	E 8820-07
75	2	Connettore a spina	E 8820-08	E 8820-08
80	2	Spazzole	E 8820-09	E 8820-09
90	1	Molla di contatto	E 8820-10	E 8820-10
110	1	Circuito elettronico	E 8820-11	E 8820-12
115	1	Fusibile	E 8820-13	E 8820-14
116	1	Gommino blocco fusibile	E 8820-15	E 8820-15
130	1	Forcella strozzacavo	E 8820-16	E 8820-16
150	1	Coperchio	E 8820-17SW	E 8820-17SW
155	1	Gommino blocco coperchio	E 8820-18	E 8820-18
160	1	Vite di blocco	E 8820-19	E 8820-19
170	5	Vite di blocco	E 8820-20	E 8820-20
190	1	Manicotto protezione cavo	E 8820-21	E 8820-21
250	1	Rotore	E 8820-22	E 8820-23
260	1	Cuscinetto di base	E 8820-26	E 8820-26
270	1	Cuscinetto di testa	E 8820-27	E 8820-27
300	1	Sede cuscinetto intermedio	E 8820-28	E 8820-28
310	1	Sede cuscinetto	E 8820-29	E 8820-29
320	1	Cuscinetto esterno	E 8820-32	E 8820-32
330	4	Viti fissaggio calotta	E 8820-34	E 8820-34
340	1	Perno di blocco	E 8820-36	E 8820-36
180	1	Cavo alimentazione (EUROPA)	E 8825-01	-
180	1	Cavo alimentazione (USA)	-	E 8825-02-V
180	1	Cavo alimentazione (AUSTRALIA)	E 8825-03-A	-
180	1	Cavo alimentazione (USA)	-	E 8825-04-W
180	1	Cavo alimentazione (UK)	E 8825-05-G	-
180	1	Cavo alimentazione (SWITZERLAND)	E 8825-06-S	-
180	1	Cavo „Aspiration“, 2 poli	E 8825-07-C	-
180	1	Cavo „Aspiration“, 2 poli	-	E 8825-07-CV

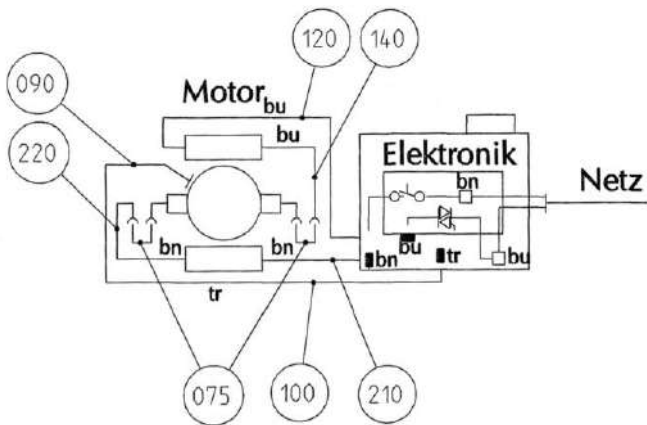
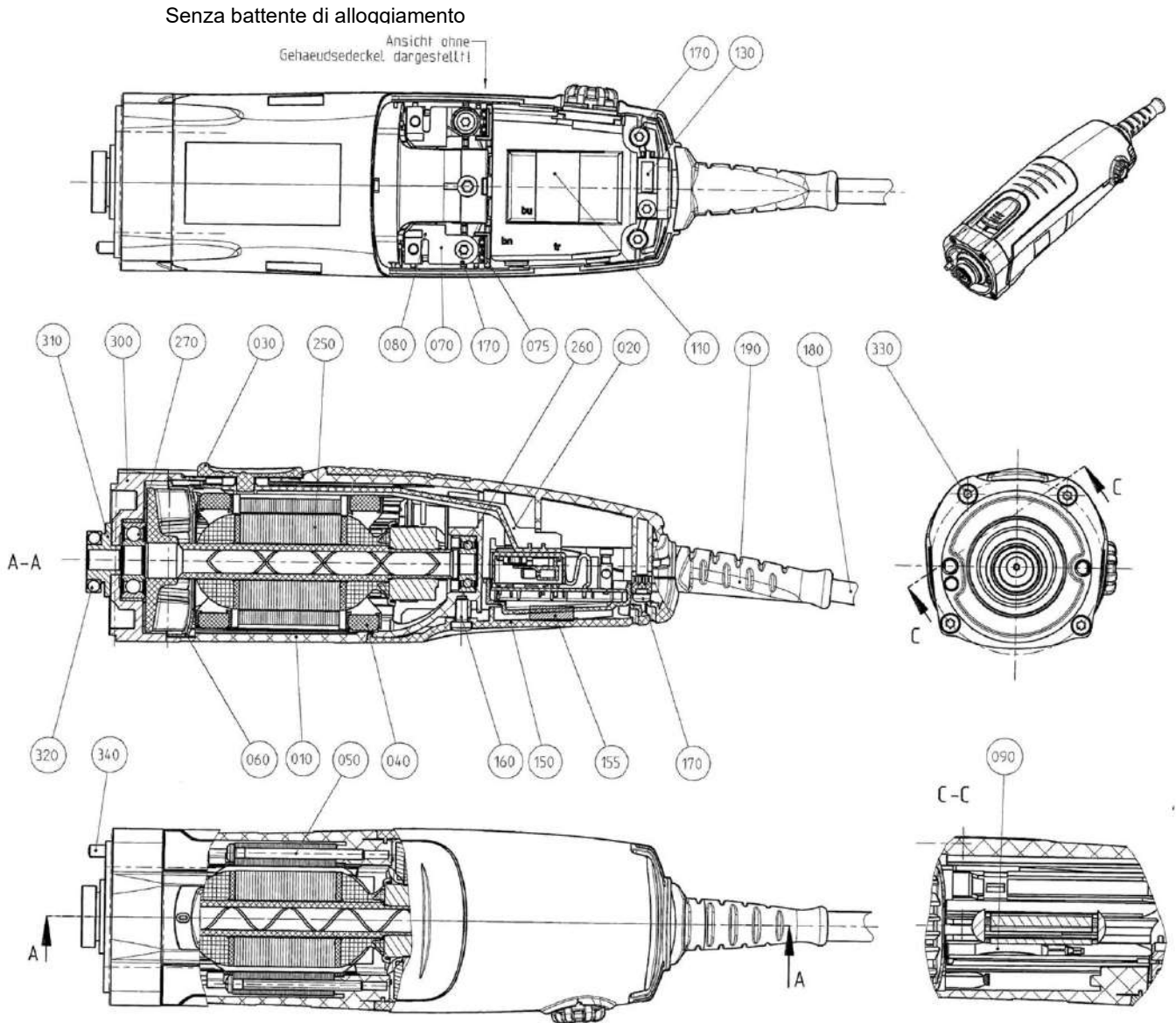


Figura 7:
Allacciamento del motore

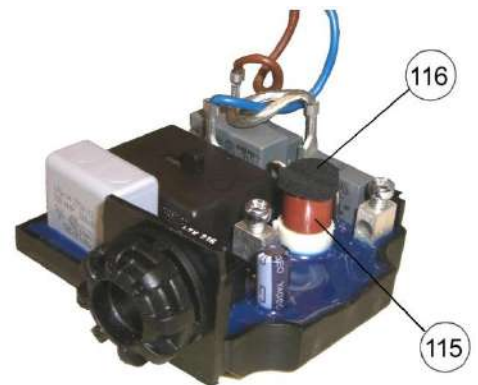


Figura 8:
Piastrina elettronica

12 Garanzia



Le seghe da gessi HEBU sono coperte da garanzia per due anni dalla data di acquisto a sui difetti di fabbricazione. Tale garanzia decade nel caso in cui vengano apportate modifiche al dispositivo, per uso improprio, per manomissioni o in caso di utilizzo di ricambi e/o materiale di consumo non originali o non approvati dalla casa produttrice. In caso di richiesta di riparazione in garanzia, si prega di includere copia della fattura con la quale si è ricevuto il materiale.

13 Smaltimento

Come tutte le apparecchiature elettroniche, le seghe da gessi HEBU devono essere smaltite secondo le norme vigenti nel paese di destinazione, e non venire gettate nei comuni rifiuti.



14 Specifiche tecniche

Modello	HB 8891 (A / G / S)	HB 8891 (B/ V)
Alimentazione	220-240 Volt, 50/60 Hz.	110-120 Volt, 50/60 Hz.
Assorbimento	250 Watt	250 Watt
Corrente	1 ~	1 ~
Velocità del motore	ca. 12000 - 21000 min ⁻¹	ca. 12000 - 21000 min ⁻¹
Oscillazioni	200-350 Oscillazioni / Secondo	200-350 Oscillazioni / Secondo
Angolo di oscillazione	6°	6°
Peso	1,3 kg	1,3 kg
Classe di protezione	II 	
Categoria di protezione	IP2X	
Rumorosità (A rated)	75 dB (A) Durante l'uso la rumorosità può raggiungere i 85 dB (A)!	
Vibrazioni	Inferiori a 2,5 m/s ² . Valore accertate secondo EN 50 144.	

15 Dati del fabbricante e servizio assistenza

Se le presenti istruzioni per l'uso sono necessarie in formato cartaceo, si prega di utilizzare i recapiti riportati di seguito.

Le istruzioni per l'uso in formato cartaceo saranno fornite entro sette giorni di calendario dal ricevimento della richiesta.

In alternativa, le istruzioni per l'uso elettroniche possono essere stampate da solo.



HEBUmedical GmbH
Badstraße 8
78532 Tuttlingen / Germany
Tel. +49 7461 94 71 - 0
eMail: service@HEBUmedical.de
Web: www.HEBUmedical.de

**Unser umfangreiches Sortiment umfasst
über 10 000 verschiedene Instrumente.
Besuchen Sie uns im Internet oder fordern Sie unseren Katalog an.**

**Our vast range of products covers over 10 000 various instruments. They can be
found in Internet or request our catalog.**

**Notre assortiment complet comprend
plus de 10 000 instruments differents.
Vous le trouverez sur Internet. Ou bien demandez notre catalogue.**

**Nuestro amplio instrumental consta de más de 10 000 artículos diferentes. Usted
puede visitarnos en Internet
o solicitar nuestro catálogo.**

**Il nostro assortimento comprende più di 10 000 strumenti differente.
Lei ci può vistare in Internet
o chieda il nostro catalogo.**



HEBUmedical GmbH

Badstraße 8 • 78532 Tuttlingen / Germany

Tel. +49 (0) 7461 94 71 - 0

info@HEBUmedical.de • www.HEBUmedical.de